



用户手册

LG Pra.L (肤丽爱) 提 拉紧致嫩肤 仪



使用产品前请阅读使用说明。
保留备用。

型号
BLL1

版权所有 © 2019 LG Electronics Inc. 保留所有权利。



MFL71422332

1908_Rev01

www.lg.com

2 目录


目录

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 皮肤安全性信息 ... 3 | 如何使用本产品 . . . 29 |
| 安全使用本产品的建议 . . . 3 | 更改护理模式 . . . 29 |
| 2 设置..... 11 | 更改级别 31 |
| 通知 11 | 语音指导设置 . . . 32 |
| 零件 12 | 设置语言 32 |
| 主机说明 13 | 4 故障排除 33 |
| 3 操作..... 15 | 故障排除 33 |
| 综合模式 15 | 5 附录..... 34 |
| 紧致专用模式 . . . 21 | 规格 34 |
| 提拉专用模式 . . . 23 | 维护 35 |
| 电池充电 25 | 处理设备 35 |
| 充电 25 | 6 使用注意事项 36 |
| 充电状态检查 . . . 27 | 安全信息 36 |
| 电池状态检查 . . . 28 | |

安全使用本产品的建议



- 如果您目前正在接受或在最近 2 个月内接受过皮肤相关手术、整容手术或脱发手术，请勿使用本设备。请仅在咨询专家后使用。

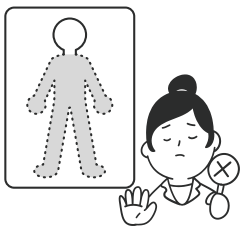


- 仅可用于面部护理，不建议用于身体。
- 请勿在包括口腔在内的粘膜上使用本设备。请勿将此设备直接放在耳朵上。



- 在脖子上使用本机时，请避开甲状腺所在的颈部。


4 皮肤安全性信息

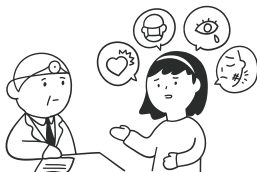

- 如果出现以下任何状况，请在咨询专家后使用本设备：
 - 心血管疾病
 - 内分泌异常
 - 感觉神经系统异常
 - 皮肤病
 - 眼科和手术（LASIK、LASEK 等）
 - 传染病
 - 癫痫患者
 - 服用荷尔蒙失调药物的患者
 - 如果您患有其他疾病，请说明疾病名称或身体异常症状
 - 正在接受皮肤病相关治疗或有皮肤问题
 - 过敏、痤疮、皮肤感染、皮肤相关规程、美容手术、脱发规程
 - 如有皮肤病或皮肤刺激
 - 如果植入电子设备，如心脏起搏器，或佩戴金属假肢
- 在使用本设备时，根据个体皮肤状态差异，可能会引起对皮肤的刺激。如果产生皮肤刺激，请减少使用次数。如果这种刺激持续存在，请停止使用。



- 不推荐怀孕、月经、哺乳期妇女使用。（不稳定的荷尔蒙平衡可能会引起暂时性的皮肤问题。）

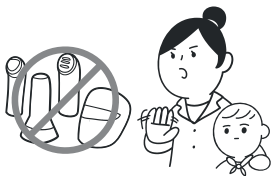

- 请勿让无法清楚表达自己意志（包括婴儿）的人使用。




- 若对紫外线过敏，请勿使用。

6 皮肤安全性信息



- 剃须后请勿立即使用本设备。

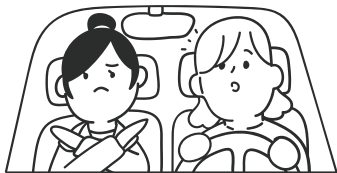

- 开车或步行时请勿使用本设备。



- 请勿长时间将设备的头部停留在脸部的任意位置，请按照本手册指导使用。



- 若长期使用，请遵循建议的使用时长，因为有可能发生低温烧伤。



- 当带有 LED 的设备正在运行时，请勿与 LED 灯有直接目光接触。过度暴露于光线下可能会导致眼睛受伤。



- 使用前，请将本设备可能触及的贵金属部件去除。

8 皮肤安全性信息



- 请勿将本产品用于此说明书所列内容之外的用途。

常见问题

Q1 “我应该使用什么样的护肤品？”


请在肌肤上涂抹水溶性产品，如水凝胶（水凝霜）或超声波凝胶。

请注意，使用含有以下成分的护肤品可能会减弱效果：酒精、防晒霜、视黄醇、油

Q2 “如何确定本机是否适合我的皮肤？”

在用于面部之前，建议在手臂内侧试用您打算涂抹的水凝胶并测试产品。

Q3 “如果觉得干燥，该怎么办？”

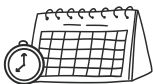

- 请减少一周内的使用频率。



- 建议使用后立即使用保湿霜或一次性面膜进行保湿。



- 如果您正在服用药物，请先咨询您的医疗保健专业人员，之后方可使用该药物，以免皮肤干燥。

通知

本手册中使用的符号



注


指特殊注意事项和操作特征。




注意

指注意事项以防止滥用造成的潜在损害。

零件

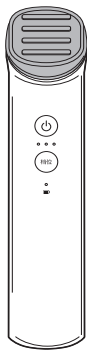


主机

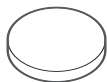

头部保护套



充电底座

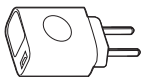

充电插头



USB连接线
(Type-C)




保护袋




说明书/快速使用
指南

主机说明


主机

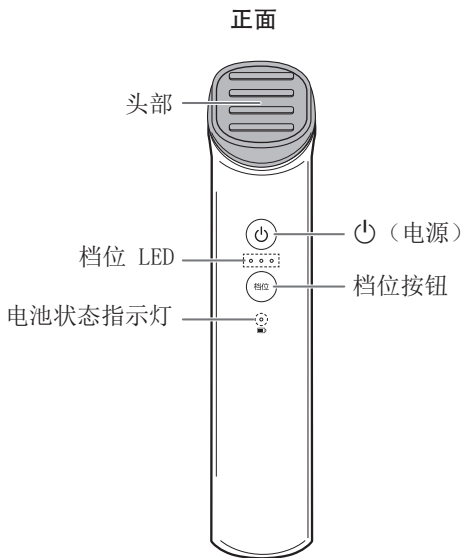

底部

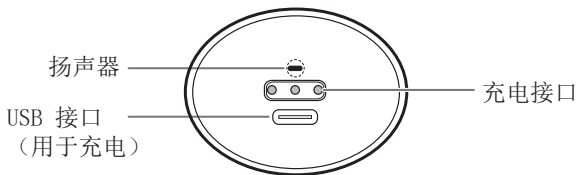

充电底座

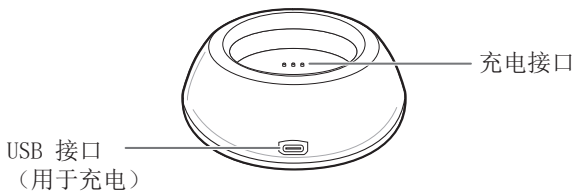

综合模式

综合模式包括紧致专用模式和提拉专用模式。

紧致专用模式有助于改善皮肤真皮层的弹性。提拉专用模式会刺激皮肤组织和肌肉，以面部提升。

综合模式工作总时长为 18 分钟，每个区域 6 分钟，每次护理三个区域。

推荐的使用周期

建议每周使用两次本产品。

在脸部同一部位连续使用两次以上可能会引发皮肤灼热。

使用产品

建议为您的皮肤使用水溶性产品，如水凝胶（霜）或超声波凝胶。

主要功能

紧致专用模式以射频运作，且 RED LED 亮起。


提拉专用模式以微电流运行。在操作提拉专用模式期间，会定期发出振动声音以进行通知。运行期间，每 5 秒伴有音效。慢慢向上提拉并按摩，这时会听到一次声音效果。


! 注

如果您将语言指导功能设为静音，本机将不提供语音指导和音效指导。


使用方法

请按照以下步骤进行护理。

1. 使用本机器之前，请先洁面确保脸部清洁。
2. 洁面后请在面部护理区域或者机器头部涂抹足量水凝胶，否则皮肤可能会产生刺痛感。
3. 按 （电源）按钮开启机器，进入综合模式。

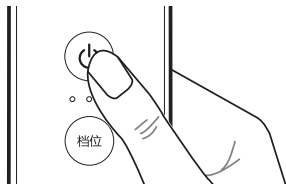

如果在使用紧致或提拉专用模式时如需切换至综合模式，长按档位按钮约 5 秒，即可在各模式间循环切换。

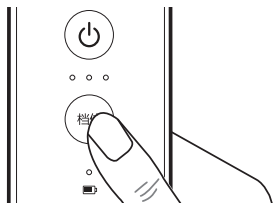


4. 从下到上按摩您要护理的第一个护理区域。

护理区域：

额头

⚠ 在颈部使用本仪器时，请避开甲状腺所在的部位使用。有甲状腺疾病时，请咨询医生后再使用。

- 紧致专用模式运行 3 分钟。

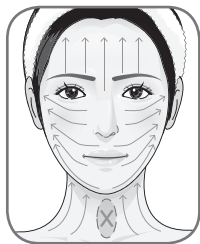

按照图片中的指示慢慢向上提拉，同时进行按摩，直至您听到一声音效。

- 本设备每 5 秒产生一次音效。

- 紧致专用模式运行 3 分钟后，将通过语音指导切换到提拉专用模式。以同样的方法按摩同一区域 3 分钟。

！ 注

- 本机在静音模式无任何语音提示。
- 为了在运行提拉专用模式时发出通知，振动会周期性响起。

18 操作


5. 从下到上按摩您要护理的第二个护理区域。

护理区域：

左脸颊

⚠ 在颈部使用本仪器时，请避开甲状腺所在的部位使用。有甲状腺疾病时，请咨询医生后再使用。

- 紧致专用模式运行 3 分钟。

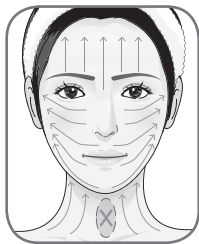

按照图片中的指示慢慢向上提拉，同时进行按摩，直至您听到一声音效。

- 本设备每 5 秒产生一次音效。

- 紧致专用模式运行 3 分钟后，将通过语音指导切换到提拉专用模式。以同样的方法按摩同一区域 3 分钟。

! 注

- 本机在静音模式无任何语音提示。
- 为了在运行提拉专用模式时发出通知，振动会周期性响起。


6. 从下到上按摩您要护理的第三个护理区域。

护理区域：

右脸颊

⚠ 在颈部使用本仪器时，请避开甲状腺所在的部位使用。有甲状腺疾病时，请咨询医生后再使用。

• 紧致专用模式运行 3 分钟。

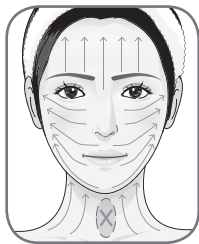

按照图片中的指示慢慢向上提拉，同时进行按摩，直至您听到一声音效。

- 本设备每 5 秒产生一次音效。

• 紧致专用模式运行 3 分钟后，将通过语音指导切换到提拉专用模式。以同样的方法按摩同一区域 3 分钟。

！ 注

- 本机在静音模式无任何语音提示。
- 为了在运行提拉专用模式时发出通知，振动会周期性响起。

20 操作

7. 本设备在运行 18 分钟后自动关闭。
8. 按摩后，请使用温水冲洗面部。
9. 使用后，用干毛巾擦拭本机，将头部保护套（可选附件）戴在头上并存放本机。

! 注

- 水凝胶另售。我们建议使用符合您的皮肤类型的水凝胶。
- 如果您因皮肤个体差异而感到皮肤刺激，例如刺痛感，请从1档开始使用本设备。
- 如果没有使用足够的水凝胶，可能会使皮肤产生刺痛感。请将大量水凝胶涂抹于面部区域或设备头部。

紧致专用模式

如需使用紧致专用模式，长按档位按钮约 5 秒，即可在各模式间循环切换至紧致专用模式。

紧致专用模式共需 9 分钟，每个区域 3 分钟，可一次护理三个区域。

主要功能

紧致专用模式以射频运作，且 RED LED 亮起。

运行期间，每 5 秒伴有音效。慢慢向上提拉并按摩，这时会听到一次声音效果。

! 注

如果您将语言指导功能设为静音，本机将不提供语音指导和音效指导。


22 操作

1. 从下到上按摩您要护理的第一个护理区域 3 分钟。

护理区域：

额头/脸颊/下巴/颈部

- ⚠ 在颈部使用本仪器时，请避开甲状腺所在的部位使用。有甲状腺疾病时，请咨询医生后再使用。

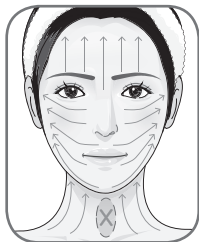

按照图片中的指示慢慢向上提拉，同时进行按摩，直至您听到一声音效。

- 本设备每 5 秒产生一次音效。

2. 从下到上按摩您要护理的第二个护理区域 3 分钟。
3. 从下到上按摩您要护理的第三个护理区域 3 分钟。

提拉专用模式

如需使用提拉专用模式，长按档位按钮约 5 秒，即可在各模式间循环切换至提拉专用模式。

提拉专用模式共需 9 分钟，每个区域 3 分钟，可一次护理三个区域。

主要功能

提拉专用模式以微电流运行。在操作提拉专用模式期间，会定期发出振动声音以进行通知。

运行期间，每 5 秒伴有音效。慢慢向上提拉并按摩，这时会听到一次声音效果。

注

如果您将语言指导功能设为静音，本机将不提供语音指导和音效指导。


24 操作

1. 从下到上按摩您要护理的第一个护理区域 3 分钟。

护理区域：

额头/脸颊/下巴/颈部

- ⚠ 在颈部使用本仪器时，请避开甲状腺所在的部位使用。有甲状腺疾病时，请咨询医生后再使用。

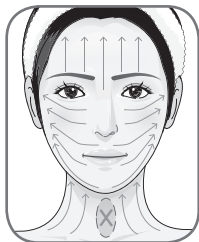

按照图片中的指示慢慢向上提拉，同时进行按摩，直至您听到一声音效。

- 本设备每 5 秒产生一次音效。

2. 从下到上按摩您要护理的第二个护理区域 3 分钟。
3. 从下到上按摩您要护理的第三个护理区域 3 分钟。

! 注

为了在运行提拉专用模式时发出通知，振动会周期性响起。


电池充电

充电

使用本设备之前，请给电池充满电。

⚠ 注意

- 请使用本机自带充电接头。
- 使用其他充电接头可能导致故障并且无法修复。

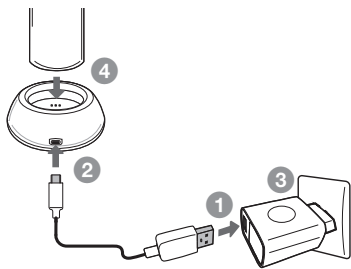

1. 使用 USB 电缆连接充电插头。
2. 使用 USB 线为底座充电。
3. 将充电插头连接到电源插座。
4. 在您将本机连接至充电底座时，将开始充电。关于如何检查电池充电状态，请参阅检查充电状态和检查电池状态。（第 27 - 28 页）

! 注

- 本设备在充电过程中不能使用。
- 可将本机底部连接至（充电用）USB 端口充电。
- 电池充满电后，拔掉电源以节省能源。
- 本设备可以使用电压为：5V，输出电流为：1A 以上的蓄电池进行充电。
- 保持充电底座和设备的充电插座干燥。潮湿会导致充电插座腐蚀。

充电状态检查



将本设备放在充电底座上时，可以通过电池状态 LED 检查电池的充电状态。

LED	状态
红色	电池正在充电。
绿色	电池已充满电。

电池状态检查

您将本机从充电底座断开之后，您可以通过电池状态 LED 检查电池的充电状态。

可以通过按电源按钮开机以检查电池状态。

电池状态 LED 将根据电池充电状态而变化。

LED	状态
红色 (闪烁)	电池电量不足且需要充电。 语音提示“请充电”，并且红色LED闪烁，然后电源自动关闭。
红色	电池电量不足。 红色 LED 亮起并保持常亮。
绿色	电池将进行充电。 绿色指示灯点亮三秒，然后熄灭。

! 注

如果将语音指导功能设置为静音，则本设备将不会语音提示和声效。

如何使用本产品

更改护理模式



开启本设备，长按档位按钮约 5 秒，即可在各模式间循环切换护理模式。

护理模式	状态
综合模式	运行总计 18 分钟 (每阶段 6 分钟)
紧致专用模式	运行总计 9 分钟 (每阶段 3 分钟)
提拉专用模式	运行总计 9 分钟 (每阶段 3 分钟)

! 注

- 综合模式包括紧致专用模式和提拉专用模式。
 - 您可以使用本设备在每种模式下护理共三个面部区域。
 - 为了在运行提拉专用模式时发出通知，振动会周期性响起。
 - 使用本设备时，电源可能会自动关闭。
- ! 根据用户的皮肤，如果连续使用两次或长时间使用，可能会导致设备发热。在这种情况下，为了安全起见，电源会自动关闭。足够的时间后，请再次使用本设备。

更改级别



设备开启后，按下档位按钮，级别将更改。我们建议您选择适合您皮肤状态的级别。


档位 LED 将根据级别而改变。

●：打开 / ○：熄灭


LED	状态
●○○	1 级
●●○	2 级
●●●	3 级

! 注


- 如果设备与您的皮肤分开，其将暂停并且当前的档位 LED 将闪烁。
- 即使设备未与皮肤接触，护理时间也会继续。
- 如果设备在 5 分钟内未与皮肤接触，设备将自动关闭。

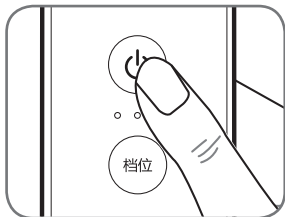


语音指导设置

在电源打开的情况下，每次更改时按住 

（电源）按钮约 5 秒。
（语音提示→ 效果音
提示→ 指导关闭（静音））

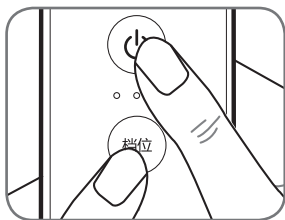

设置语言

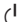在电源打开的情况下，每次更改时同时按住 （电源）和档位按钮约 3 秒。


（中文→英语→韩语）

故障排除

症状	原因与解决方案
本设备不能正常运行。	<ul style="list-style-type: none">• 确保您已正确按下电源按钮。• 根据本用户手册中的说明为设备充电。• 检查设备上的电池状态 LED 是否点亮，以确保设备正在充电。• 充电时不会工作。 使用前请停止充电。
无电源	<ul style="list-style-type: none">• 电池电量已耗尽。重新充电电池。• 用充电接头将本设备连接到电源。• 检查连接设备的充电器是否带电。• 检查设备上显示的电压是否与本地电源电压相符。
设备温度在使用期间升高。	如果您感觉本设备温度远高于您的体温，请停止使用，并联系 LG 电子客户服务中心。

规格

电源（交流适配器）：

- 型号：ADS-12BA-06Y 05010EPCN C
- 制造商：深圳欧陆通电子股份有限公司
- 输入：100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
- 输出：5 V  2 A

尺寸（宽 x 高 x 深）：

- 约 40 mm x 163.6 mm x 42 mm（设备）
- 约 71.8 mm x 25.4 mm x 71.8 mm（充电底座）

运行温度：5 ° C 至 35 ° C

运行湿度：0 % 至 90 %

建议使用时间：每周两次

※ 充电后，可使用 3 档皮肤护理模式约 2 小时。

※ 使用时间与电池种类、周围温度、使用条件有关。

充满电时间：3 小时内

※ 充电时间可能因电池的剩余容量、环境温度或充电条件而异。

- 设计和规格若有变更，恕不另行通知。

维护

处理设备

运送设备时

请保存原始的运输纸箱和包装材料。如果您需要运输设备，为了获得最大程度的保护，请重新包装设备，使用工厂最初的包装。

保持外表面清洁

- 请勿在设备附近使用挥发性液体，例如杀虫喷雾剂。
- 强压擦拭可能会损坏表面。
- 请勿让橡胶或塑料产品长时接触本设备。

清洁设备

使用柔软干燥的布清理设备。如果表面太脏，使用软布沾水或湿巾清洁。请勿使用酒精、汽油或稀释剂等强溶剂，否则可能会损坏设备表面。

安全信息



注意：为了降低触电的危险，请勿拆卸盖子（或背部），内部零件没有用户能自行维修，有关维修，请咨询合格的维修人员。



等边三角形内带有箭头符号的闪电符号旨在提醒用户，产品外壳内存在未绝缘的危险电压，其强度可能足以对人员构成触电风险。



等边三角形内的感叹号旨在提醒用户注意产品随附文献中的重要操作和维护（维修）说明。

警告：为防止火灾或触电危险，请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中。

警告：请勿将本设备安装在书柜或类似设备等狭小空间内。

注意：请勿在本产品周围使用高压产品。（例如，电苍蝇拍）本产品可能因电击而发生故障。

注意：设备上不应放置明火火源，如点燃的蜡烛。

注意：设备不应暴露在水中（滴落或飞溅的液体），并且不应将装有液体的物体（如花瓶）放在设备上。

38 使用注意事项

注意：请勿堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。

机柜中的插槽和开口用于通风并确保产品的可靠运行以及防止产品过热。切勿将产品放在床上、沙发、地毯或其他类似表面上，从而堵塞开口。除非提供适当的通风或遵守制造商的说明，否则不得将本产品放置在书架或机架等内置安装中。

注意：有关产品标识和供应额定值等安全标记信息，请参阅产品底部或其他表面上的主要标签。

1. 身体、感官、精神能力下降，或缺乏相关知识经验的人群（包括 8 岁以下儿童）在没有安全人员监督或指导的情况下，不得使用本设备。
2. 未成年儿童切勿玩本设备。
3. 未经监督，儿童不得使用本设备清洁或护理。
4. 本设备只能使用随机附带的电池充电器。
5. 作为可拆卸电源设备提供的第三类结构的一部分，说明书规定本设备只能随机提供的设备一起使用。
6. 第三类设备说明指出，仅在 SELV 供应。

有关电源线的注意事项

电源插头是断开的设备。万一发生紧急情况，电源插头必须随时可用。

检查本用户手册的规格页以确定当前要求。

请勿超出墙壁插座的负荷。超出负荷的墙壁插座、松动或损坏的墙壁插座、延长线、磨损的电源线或损坏或破裂的电线绝缘都是危险的。任何这些情况都可能导致触电或火灾。请定期检查设备的电源线，如果其外观显示损坏或老化，请拔下电源线，停止使用设备，并请授权维修中心使用精确的更换零件更换电线。保护电源线不受物理或机械滥用的影响，如扭曲、扭结、挤压、关门的挤压或被踩。请特别注意插头、墙壁插座以及电源线离开设备的位置。

注意：只能使用本设备附带的交流适配器。请勿使用其他设备或其他制造商提供的电源。使用任何其他电源线或电源可能会导致设备损坏并使保修失效。

注意 在湿度较低的环境中使用本产品时

- 它在低湿度的环境中可能会导致静电。
- 建议在触摸任何导电的金属物体后使用本产品。

适用于使用电池的型号

本设备配有便携式电池或蓄电池。

如何从设备上安全地取出电池或电池组：要取出旧电池或电池组，请按照相反顺序执行装配步骤。为防止污染环境以及可能对人类或动物健康造成威胁，必须将旧电池或电池组放入指定收集点的适当容器中。请勿将电池或电池组与其他废物一起处理。建议您使用本地免费的报销系统处理废旧电池或电池组（可能不适用于您所在的地区）。不应将电池或电池组暴露于过热环境（如阳光）、火源或类似情况下。

1. 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
2. 在取出电池时，器具必须要断电。

符号

~	指交流电（AC）。
≡	指直流电（DC）。
回	二类电气设备适用。
⏻	指电源。
⏻	指“开”（电源）。
⚡	指危险电压。

产品存储和维护

- 请勿将充电适配器放入排水管或水槽中或将其放在可能使其掉入水中或其他液体的地方。请勿在淋浴时使用充电底座或将其浸入水中。
- 不要触摸水中的充电电缆，并立即断开充电适配器。
- 使电源线远离受热表面。
- 始终使用提供的充电接头。
- 如果长时间不使用，请至少每 3 个月对电池充电一次以维持电池寿命。
- 请勿用尖锐的金属物体（如钥匙、发夹、项链或指甲）戳设备上的缝隙。
- 请放入包装箱。如需外出携带本产品，请将其放置在原厂包装物中。
- 请勿将挥发性液体（如杀虫剂）置于其附近。
- 用力擦拭设备表面会损坏设备。
- 请勿长时间将塑料制品或橡胶置于设备上。
- 使用柔软干燥的布清理设备。如果表面太脏，使用软布沾水或湿巾清洁。
请勿使用酒精、苯或稀释剂等强烈的化学物质，否则可能会损坏设备表面。
- 请勿将本设备放入洗碗机、烤箱、洗衣机中。
- 请勿将本设备暴露与阳光直射下，或放置于热水或沸水中。



LG 美容仪产品保修证

(本保修证为商品三包的重要依据，
请您妥善保管。)

尊敬的顾客：感谢您购买LG美容仪产品，您在使用过程中对产品的性能问题、感性问题以及售后服务方面的任何疑问请与我们联络。

全国服务热线： 400-819-9999

LG电子网上服务： www.lg.com/cn

乐金电子有限公司

地址：中国广东省惠州市仲恺高新技术开发区惠
台工业园惠风东一路13号

电话：400-819-9999

乐金电子有限公司美容仪产品保修说明

乐金电子有限公司为了给消费者提供满意放心的产品，将严格遵守国家的有关法律，遵照《中国消费者保护法》，《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司的售后服务制度如下：

一、产品包修条件：

1. 此三包卡为质保凭证。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
2. 您所购买的产品（包修期自开具发票日起计算）：美容仪整机包修期为一年（不含随机赠送的纽扣式电池），附件（包含袋子、刷子、面罩带）包修期为六个月。
3. 请保管您产品的附件，按三包基准退换时必须附件及包装齐全。
4. 顾客应妥善保管购机发票及此保修卡，保修时凭购机发票及此保修卡进行维修；如在包修期内接受修理中有任何疑问或产品故障，顾客均可拨打热线电话：400-819-9999 寻求帮助。

5. LG电子指定的维修网点将保证修理质量，如产品修复后三十日内又出现重复故障（相同故障相同部件问题），维修网点将免费为顾客修复（包括超包期的产品）。
6. 根据国家规定，下列情况不属于包修范围，我们将收取费用（收费标准=修理费用+更换零件费用+上门费用）。
 - * 超过三包有效期。
 - * 消费者使用不当或未按照产品使用说明书指导进行使用而造成的故障。
 - * 非本公司特约维修单位拆卸及维修造成的故障及损坏。
 - * 无厂名、厂址、生产日期、产品合格证。
 - * 擅自涂改发票原件和三包凭证的。
 - * 因移动或跌落造成的故障，划伤或破损（人为因素）。
 - * 因意外灾害事故或不可抗拒灾难（如火灾、水灾、地震、雷击、煤气爆炸事故等等）造成的故障。

二、热线咨询电话：

本产品出厂前已通过国家规定的有关质量检测，检验为合格产品，但不能排除因运输等因素造成的损坏。全国各地的顾客如有任何关于我们产品的问题或任何投诉，均可拨打我们的热线电话-----

1. 全国统一服务热线电话：400-819-9999，享受保修服务及寻求您所需要的帮助。
2. 电话：400-819-9999

三、维修记录：

第 — 次	维修站 名称		电 话		顾 客 签 名
	维修站 地址		站 编		
	故 障 现 象	故 障 原 因	维 修 内 容		

第 — 次	维修站 名称		电 话		顾 客 签 名
	维修站 地址		站 编		
	故 障 现 象	故 障 原 因	维 修 内 容		

第 三 次	维修站 名称		电 话		顾 客 签 名
	维修站 地址		站 编		
	故 障 现 象	故 障 原 因	维 修 内 容		

购买后请认真阅读此保修证内容并妥善保存，填写相关产品信息，如不符合此保修证中相关保修条件及要求等内容的，本公司售后部门有理由拒绝提供相关售后保修服务！

发票保管粘贴处



www.lg.com/cn

- 接通范围广 覆盖全国各级城市
- 专业人员服务咨询及维修登记
- 固定电话 手机均可拨打
- 话费低廉 无论何地拨打不记长途话费







