



LG Pra.L

使用说明书

多功能美容仪

为安全便利地使用产品，使用前请务必阅读使用说明书。

型号
BLP1

www.lg.com

版权所有 © 2021-2023 LG Electronics Inc. 保留所有权利。

目录

进行皮肤护理时的注意事项

- 4 安全使用须知
- 7 Q&A

使用须知

- 8 功能须知
- 9 确认产品组成

查看产品

- 10 主机
- 13 使用支架

护理皮肤

- 14 护理皮肤前注意事项
- 15 准备护理
- 17 集中护理
- 21 眼部护理
- 24 冰爽护理

电池充电

- 26 充电
- 27 确认电池状态

管理产品

- 28 干净地管理主机

使用注意事项

29 安全信息

维护

32 处理装置

申报故障前确认事项

33 解决问题

附录

35 产品规格

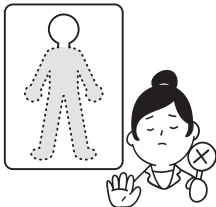
本使用说明书为通用说明书，可能包含与所购买的产品相异的图片或内容。本使用说明书可能根据公司情况有所变更。

进行皮肤护理时的注意事项

安全使用须知



- 处于妊娠期或者哺乳期的女性不建议使用本仪器。
(妊娠期或者哺乳期中，因荷尔蒙失衡可能会导致暂时性的皮肤问题，与产品使用无关。)




- 本产品为面部专用产品，因此不建议用于身体其他部位。



- 使用时请避开甲状腺部位。



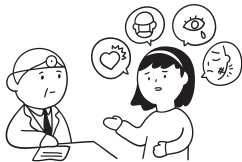- 接受过整形手术或皮肤相关微整形及治疗后，建议在约 2 个月后皮肤已经恢复的状态下使用。



- 本产品的功效及安全性已获得外部官方机构验证，请放心使用。
- 但是，如果您患有其他严重疾病，或正在接受治疗，建议您咨询专科医生后再使用。
- 换季等环境因素、饮酒或压力等身体因素可能导致皮肤状态暂时发生改变，与是否使用本产品无关。若皮肤状态发生变化，建议暂停使用，等皮肤恢复正常或咨询专科医生后使用。

- 使用本产品时，根据个人皮肤状态，可能出现皮肤泛红或刺痛等皮肤刺激。若此类刺激持续存在，请立即停止使用，咨询皮肤科医生后再使用。
- 面部有皮肤疾病或皮肤容易发炎的人群请咨询医生后使用。
- 佩戴心脏起搏器或接受器官移植者不建议使用。
- 请勿连续使用冰爽护理。若连续使用冰爽护理，为了维持冰爽护理头内部的适中温度，在语音提示后，产品电源可能会自动关闭。此种情况下，请等待 60 分钟后再使用。
- 冰爽护理仅可用于皮肤美容。
- 若接触皮肤的护理头部分出现裂痕或破损，请停止使用并联系客服中心。



- 包括儿童在内的无法明确表达个人意愿的人员，建议在监护人指导下使用。（未满36个月的婴幼儿请勿直接操作使用。）



- 紫外线过敏等光过敏性疾病患者，勿使用。



- 请勿将仪器护理头停留在一个部位使用，按照本使用说明书的说明一边移动一边使用。
- 不建议将本产品用于除皮肤美容目的外的其他用途。



- 运行中请勿直视 LED 灯。



- 使用本产品前，请取下与产品接触部位佩戴的饰品。



- 请勿将产品用于本使用说明书所述内容以外的其他用途。

I Q&A

Q1

使用产品前要涂抹哪种护肤品？

请彻底洁面后涂抹原本使用的护肤品或适合皮肤类型的护肤品（电流专用凝胶或维生素精华等）后使用本产品。

使用含有以下成分的护肤品时请注意，可能会降低使用效果。

（如：变性乙醇、防晒产品、视黄醇、油成分）

Q2

如果感觉皮肤干燥怎么办？



— 请减少每周使用频率。



— 使用产品后，建议涂抹保湿面霜。



— 若您正在服用药物，请在使用本产品前咨询医生，该药物是否会使皮肤干燥。

使用须知

功能须知

本美容仪用于肌肤弹性护理采用高频 / 微电流复合技术，同时结合超声波导入 / 电离子渗透复合技术促进化妆品有效吸收。

※ 高频：通过在皮肤组织内部产生深层热量，从而提升肌肤弹性的技术。

※ 微电流：通过刺激皮肤组织及肌肉，帮助改善肌肤弹性的技术。

- 什么是微电流？一种小于1,000 μ A的微弱电流，类似于流经生物体的电流

※ 超声波导入：利用超声波将化妆品的有效成分传递至皮肤深层的技术。

※ 离子电渗透：赋予皮肤电位差，促进护肤品有效成分深层渗透的技术。

集中护理模式

使用一个产品，仅通过一个护理头即可同时实现皮肤弹性提升并促进护肤品吸收。

眼部护理模式

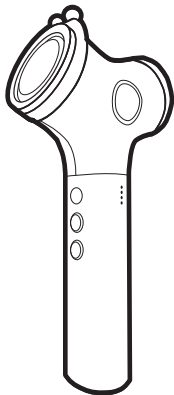
采用针对娇嫩眼周肌肤的低刺激复合弹性护理技术与轻柔贴合眼周修护的专用护理头，缔造童颜美眸。

冰爽护理模式


采用冰爽护理，缩小皮肤毛孔。

确认产品组成


主机



充电适配器

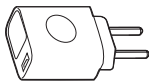


USB 线 (Type-C)

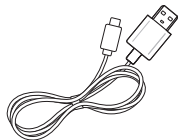


支架



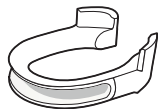支架固定器




说明书

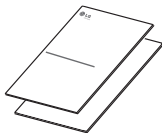

查看产品

主机

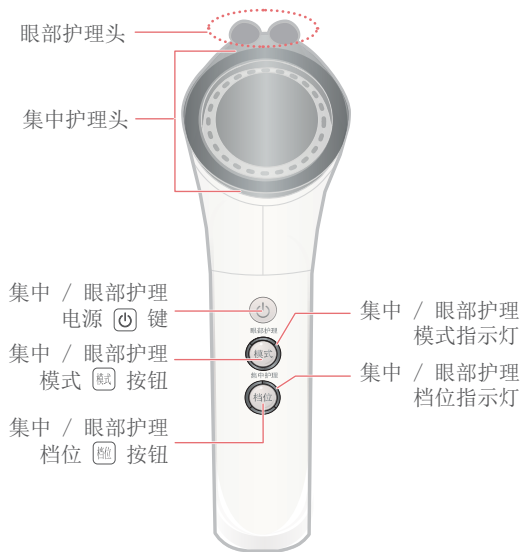
正面




背面



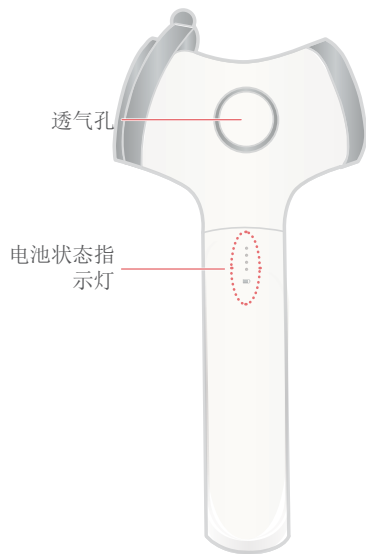侧面




底部

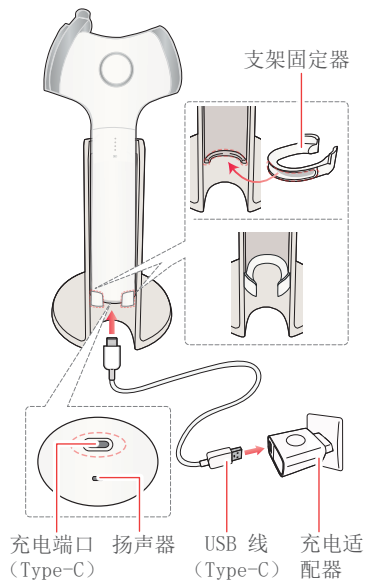


使用支架

可将产品放置在支架上充电。

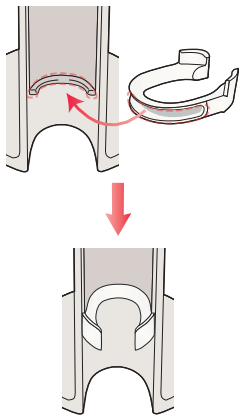
- 1 将支架固定器凹陷的槽对准支架突出的底座部分，插入支架固定器。



- 2 将产品放置在支架上时，请露出产品的电池状态指示灯。

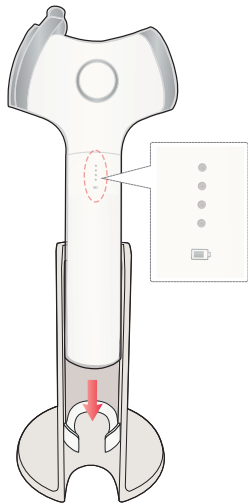

- 3 请将 USB 线和充电适配器连接至产品底部的充电端口，为电池充电。

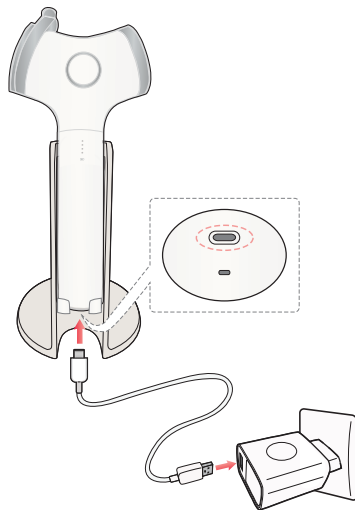

护理皮肤

护理皮肤前注意事项

请先确认!

- 请勿近距离直视运行中的 LED 灯。
- 平时佩戴眼镜的人士请务必摘下眼镜后使用。

建议使用周期

本产品最好按照如下建议周期使用。

- 集中护理：建议 1 周 3 次
- 眼部护理：建议 1 周 3 次
- 冰爽护理：建议 1 天 1 次，在集中护理 / 眼部护理后进行冰爽护理，帮助舒缓皮肤。

若使用频率高于建议使用周期，可能给皮肤造成刺激。

建议使用护肤品




请彻底洁面后涂抹原本使用的护肤品或适合皮肤类型的护肤品（电流专用凝胶或维生素精华等）后使用本产品。

准备护理

设置语音




请先确认!

若语音设置为提示音关闭（静音），将不提供语音或效果音。若需要语音，请打开语音提示。

- 1 请按集中 / 眼部护理电源  键，打开仪器。
- 2 每次同时长按集中 / 眼部护理模式  按钮和集中 / 眼部护理档位  按钮约 3 秒，将更改语音设置。
(语音 → 效果音 → 提示音关闭 (静音))



设置语言



- 1 请按集中 / 眼部护理电源  键，打开仪器。
- 2 每次同时长按集中 / 眼部护理电源  键和集中 / 眼部护理模式  按钮约 3 秒，将更改使用语言。
(中文 → 英文 → 韩文)



设置模式

集中护理 / 眼部护理



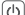
- 1 请按集中 / 眼部护理电源  键，打开仪器。
- 2 每次按集中 / 眼部护理模式  按钮，将更改护理模式。（集中护理 / 眼部护理）

✓ 使用须知

若在集中护理或眼部护理过程中欲使用冰爽护理模式，请先关闭集中 / 眼部护理电源，再打开冰爽护理电源。

冰爽护理

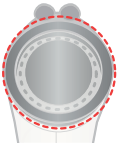

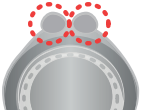





请按冰爽护理电源  键，打开仪器，将开启冰爽模式。

✓ 使用须知

若在冰爽护理过程中欲使用集中护理或眼部护理模式，请先关闭冰爽护理电源，再打开集中 / 眼部护理电源。



护理模式须知

护理名称	使用护理头	运行状态 LED
集中护理		眼部护理  集中护理
眼部护理		眼部护理  集中护理
冰爽护理		

集中护理

请先确认!

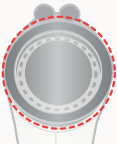- 集中护理使用集中护理头。请参考“护理模式须知”。
(→ 请参考第 16 页 “护理模式须知”)

使用护理头	运行状态 LED
	眼部护理  集中护理


- 集中护理模式下可使用加热模式。请参考“集中护理下加热模式开启 / 关闭”设置加热模式。
(→ 请参考第 20 页 “集中护理下加热模式开启 / 关闭”)
- 不建议将本产品用于除皮肤美容目的外的其他用途。

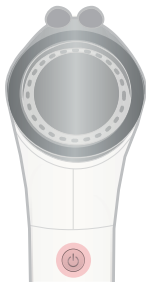
- 开始护理前，请先清洁面部。




- 2 请在每个想要护理的部位涂抹足量适合皮肤类型的护肤品，并让皮肤吸收。
(电流专用凝胶或维生素精华等)



- 3 请按集中 / 眼部护理电源  键，打开仪器。






- 4 请按集中的 / 眼部护理档位  按钮，选择适合本人的集中护理强度。共分为 3 个档位强度，从 1 档到 3 档强度逐渐增强。请在每个档位测试约 30 秒，然后选择适合自己的强度。




●：打开 / ●：关闭

使用须知

若使用本产品时未使用足量护肤品，可能会有刺痛感等皮肤刺激情况发生。

指示灯	状态	说明
	1 档	弱
	2 档	一般
	3 档	强

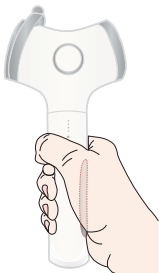- 5 请轻握产品，让产品背面的皮肤接触电极与手掌相接触。
(若不接触皮肤接触电极，则产品无法运行。)



✓ 使用须知

修护过程中 集中 / 眼部护理模式指示灯闪烁，则提示未接触皮肤接触电极。请正确握住本产品。

- 6 如图所示，在额头 / 脸颊 / 下颚部位慢慢提拉集中护理头，按摩 6 分钟。
※ 眼部周围请使用眼部护理模式。




✓ 使用须知



- 使用时请避开甲状腺部位。
- 集中 / 眼部护理模式使用过程中若产品离开皮肤，则将暂停运行。暂停状态持续 5 分钟以上时，电源将自动关闭。

- 7 护理结束后，通过语音提示，产品电源将自动关闭。

✓ 使用须知

- 护理过程中必须关闭产品电源时，请短按集中 / 眼部护理电源  键。
- 若在集中护理或眼部护理过程中欲使用冰爽护理模式，请先关闭集中 / 眼部护理电源，再打开冰爽护理电源。

集中护理下加热模式开启 / 关闭

- 1 请按集中 / 眼部护理电源  键，打开仪器。
- 2 请长按集中 / 眼部护理档位  按钮约 3 秒，选择加热模式（开启 / 关闭）。



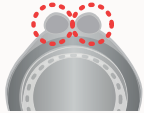

✓ 使用须知

- 眼部护理及冰爽护理不支持加热模式。
- 加热模式不可更改温度。
- 若将产品的电源关闭后再打开，加热模式将自动设置为“开启”。
- 但是，若加热模式导致产品过热时，请停止使用加热模式。
- 若开启加热模式后，使用集中护理模式，直至结束前将一直保持加热模式开启状态。
- 即使是效果音或静音状态下，加热模式开启或关闭时也将发出语音提示。

眼部护理

请先确认!

- 眼部护理时请使用眼部护理头。请参考“护理模式须知”。
(请参考 → 第 16 页 “护理模式须知”)

使用护理头	运行状态 LED
	眼部护理  集中护理

- 眼部护理不可使用加热模式。
- 不建议将本产品用于除皮肤美容目的外的其他用途。

- 开始护理前，请先清洁面部。




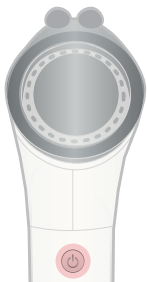
- 请在想要护理的部位涂抹足量适合皮肤类型的护肤品，并让皮肤吸收。
(电流专用凝胶或维生素精华等)




使用须知


若使用本产品时未使用足量护肤品，可能会有刺痛感等皮肤刺激情况发生。

3 请按集中 / 眼部护理电源  键，打开仪器。






4 请按集中 / 眼部护理模式  按钮，选择眼部护理模式。



5 请按集中 / 眼部护理档位  按钮，选择适合本人的眼部护理强度。共分为 3 个档位强度，从 1 档到 3 档强度逐渐增强。请在每个档位测试约 30 秒，然后选择适合自己的强度。




●：打开 / ●：关闭

指示灯	状态	说明
	1 档	弱
	2 档	一般
	3 档	强


- 6 如图所示，按照箭头方向在眼周 / 嘴角慢慢如画圆般移动眼部护理头，按摩 3 分钟。

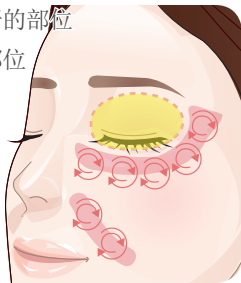- 应避开的部位
- 护理部位



- 7 护理结束后，通过语音提示，产品电源将自动关闭。

✓ 使用须知

- 护理过程中必须关闭产品电源时，请短按集中 / 眼部护理电源  键。
- 若在集中护理或眼部护理过程中欲使用冰爽护理模式，请先关闭集中 / 眼部护理电源，再打开冰爽护理电源。



✓ 使用须知

- 眼部护理头建议用于眼部周围 / 嘴角。
- 2 个眼部护理头均完全接触皮肤，产品方会运行。
- 集中 / 眼部护理模式使用过程中若产品离开皮肤，则将暂停运行。暂停状态持续 5 分钟以上时，电源将自动关闭。

冰爽护理

请先确认!


- 冰爽护理时请使用冰爽护理头。请参考“护理模式须知”。
(请参考 → 第 16 页 “护理模式须知”)

使用护理头	运行状态 LED
	

- 请勿连续使用冰爽护理。若连续使用冰爽护理，为了维持冰爽护理头内部的适中温度，在语音提示后，产品电源可能会自动关闭。此种情况下，请等待 60 分钟后再使用。
- 冰爽护理仅可用于皮肤美容。
- 在集中护理 / 眼部护理后进行冰爽护理，帮助舒缓皮肤。




- 请按冰爽护理电源  键，打开仪器。



- 2 请按冰爽护理档位  按钮，选择适合本人的冰爽护理温度。共分为 3 个档位温度，从 1 档到 3 档温度逐渐降低。请在每个档位测试约 30 秒，然后选择适合自己的温度。



●：打开 / ●：关闭

指示灯	状态	说明
	1 档	1 档 → 3 档， 温度逐渐降低
	2 档	
	3 档	

- 3 如图所示，在需要的部位慢慢移动冰爽护理头，按摩 3 分钟。




使用须知

设置的冰爽护理温度将保持至护理结束。

- 4 护理结束后，通过语音提示，产品电源将自动关闭。

使用须知


- 护理过程中必须关闭产品电源时，请短按冰爽护理电源  键。
- 若在冰爽护理过程中欲使用集中护理或眼部护理模式，请先关闭冰爽护理电源，再打开集中 / 眼部护理电源。
- 请勿连续使用冰爽护理。若连续使用冰爽护理，为了维持冰爽护理头内部的适中温度，在语音提示后，产品电源可能会自动关闭。此种情况下，请等待 60 分钟后再使用。

电池充电

| 充电

使用本仪器前请将电池充满电。

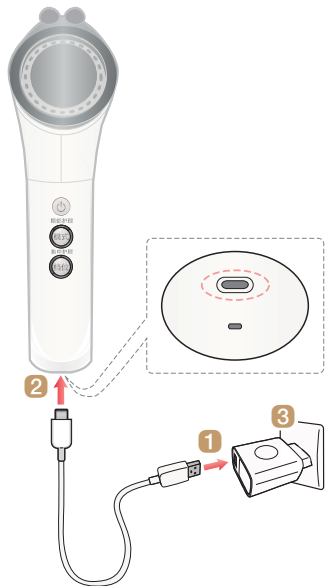- 1 请使用 USB 线连接至充电适配器。
- 2 请将 USB 线连接至产品底部的充电端口。
- 3 将充电适配器连接至电源插座，开始充电，电池状态指示灯将根据电池状态发生变动。
(→ 请参考第 27 页“确认电池状态”)



✓ 使用须知

- 请务必使用提供的适配器充电。
- 若使用其他充电适配器可能导致故障，您将无法享受维修补偿。
- 电池充满电后与电源分离可实现节能。
- 本仪器可以使用电压为 5V，输出电流为 2.0 A 或以上的充电宝充电。
- 本设备在充电过程中不能使用。
- 可将产品放置在支架上充电。若欲使用支架，请参考“使用支架”。
(→ 请参考第 13 页“使用支架”)

确认电池状态

 ○ ○ ○ ○ 可通过电池状态指示灯确认电池状态。

使用中

●：亮起 / ●：闪烁 / ●：熄灭

指示灯	电池状态
 充足	根据使用时间，电池状态指示灯将发生变化。
	
	
 不足	电量不足。
 需要充电	电量不足，需要充电。

正在充电

●：亮起 / ●：闪烁 / ●：熄灭

指示灯	电池状态
 不足	电量不足。
	根据充电程度，电池状态指示灯将发生变化。
	
	
 充电完成	

使用须知

充电时间及运行时间可能根据电池状态或运行状态有所不同。

管理产品

| 干净地管理主机

使用仪器后，若产品或产品护理头有护肤品等异物残留，请用湿纸巾或干布擦拭相应位置，然后置于干燥阴凉处晾干。

请勿使用乙醇、苯、丙酮等强化学制品。

请注意不要让水或护肤品等进入产品透气孔。

使用注意事项

| 安全信息



注意：为了降低触电的危险，请勿拆卸盖子（或背部），内部零件没有用户能自行维修，有关维修，请咨询合格的维修人员。



等边三角形内带有箭头符号的闪电符号旨在提醒用户，产品外壳内存在未绝缘的危险电压，其强度可能足以对人员构成触电风险。



等边三角形内的感叹号旨在提醒用户注意产品随附文献中的重要操作和维护（维修）说明。

警告：为防止火灾或触电危险，请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中。

警告：请勿将本设备安装在书柜或类似装置等狭小空间内。

注意：请勿在本产品周围使用高压产品。（例如，电苍蝇拍）本产品可能因电击而发生故障。

警告：装置上不应放置明火火源，如点燃的蜡烛。

注意：请勿堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。机柜中的插槽和开口用于通风并确保产品的可靠运行以及防止产品过热。切勿将产品放在床上、沙发、地毯或其他类似表面上，从而堵塞开口。除非提供适当的通风或遵守制造商的说明，否则不得将本产品放置在书架或机架等内置安装中。

注意：设备不应暴露在水中（滴落或飞溅的液体），并且不应将装有液体的物体（如花瓶）放在设备上。

注意：有关产品标识和供应额定值等安全标记信息，请参阅产品底部或其他表面上的主要标签。

1. 身体、感官、精神能力下降，或缺乏相关知识经验的人群（包括 8 岁以下儿童）在没有安全人员监督或指导的情况下，不得使用本设备。
2. 未成年儿童切勿玩本设备。
3. 未经监督，儿童不得使用本设备清洁或护理。
4. 本设备只能使用随机附带的电池充电器。
5. 作为可拆卸电源设备提供的第三类结构的一部分，说明书规定本设备只能随机提供的设备一起使用。
6. 第三类设备说明指出，仅在 SELV 供应。

有关电源线的注意事项

电源插头是断开的设备。万一发生紧急情况，电源插头必须随时可用。

检查本用户手册的规格页以确定当前要求。

请勿超出墙壁插座的负荷。超出负荷的墙壁插座、松动或损坏的墙壁插座、延长线、磨损的电源线或损坏、破裂的电线绝缘都是危险的。任何这些情况都可能导致触电或火灾。请定期检查设备的电源线，如果其外观显示损坏或老化，请拔下电源线，停止使用设备，并请授权维修中心使用精确的更换零件更换电线。保护电源线不受物理或机械滥用的影响，如扭曲、扭结、挤压、关门的挤压或被踩。请特别注意插头、墙壁插座以及电源线离开设备的位置。

注意：只能使用本设备附带的交流适配器。请勿使用其他设备或其他制造商提供的电源。使用任何其他电源线或电源可能会导致设备损坏并使保修失效。

在干燥环境中使用本产品时注意

- 它在低湿度的环境中可能会导致静电。
- 建议在触摸任何导电的金属物体后使用本产品。

适用于使用电池的型号

本设备配有便携式电池或蓄电池。

小心：如果替换电池的类型错误，可能会有发生火灾或爆炸的风险。

如何从设备上安全地取出电池或电池组：要取出旧电池或电池组，请按照相反顺序执行装配步骤。为防止污染环境以及可能对人类或动物健康造成威胁，必须将旧电池或电池组放入指定收集点的适当容器中。请勿将电池或电池组与其他废物一起处理。建议您按照本地废弃流程处理废旧电池或电池组（可能不适用于您所在的地区）。不应将电池或电池组暴露于过热环境（如阳光）、火源或类似情况下。

1. 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
2. 在取出电池时，器具必须要断电。









内置电池的型号

不要在气压低于 11.6 kPa 和海拔高于15000 m 处储存或运输。

- 更换错误型号的电池会破坏保护措施（例如，某些锂电池类型）；
- 将电池丢入火中或热烤箱中，或物理挤压或切割电池，可能导致爆炸；
- 将电池放在极高温度的环境中，可能会导致爆炸，或易燃液体/气体泄漏
- 电池处于极低的气压下，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

使用本设备时，除非有可对自身安全负责的人员加以监督或指示，否则身体、知觉或精神较弱或缺乏相关经验和知识的人员（包括儿童）不宜使用本设备。请监督儿童，禁止其随意接触本设备。

- 若在浴室中使用本设备，请使用后拔掉电源插头，因为即使关闭本设备，只要靠近水就会有危险；
- 为提供额外的保护，建议为浴室电路安装额定剩余工作电流不超过 30 mA 的剩余电流设备（RCD）。详情请咨询安装人员。
- 本设备电池只能由专业技术人员进行更换。

符号	
	交流电（AC）
	直流电（DC）
	二类电气设备适用
	待机
	打开（电源）
	危险电压
	在对仪器的电池充电时，只能使用 LG 电子（中国）有限公司认可的可拆卸电源装置。
	可拆卸电源装置



警告：请勿在有水分的环境下使用，如泡澡，淋浴，洗漱等。

产品存储和维护

- 适配器不防水，因此小心不要将其暴露在水中。
- 请勿触摸水中的充电底座或电缆，并立即断开充电接头。
- 使电源线远离受热表面。
- 如果长时间不使用，请至少每 3 个月对电池充电一次以维持电池寿命。
- 请勿用尖锐的金属物体（如钥匙、发夹、项链或指甲）戳装置间隙。
- 请保存在原包装箱或包装箱中。如果需要搬运装置，请使用包装箱重新包装。
- 请勿将挥发性液体（如杀虫剂）置于其附近。
- 用力擦拭设备表面会损坏设备。
- 请勿长时间将塑料制品或橡胶置于设备上。
- 使用柔软干燥的布清理设备。如果表面太脏，使用软布沾水或湿巾清洁。
- 请勿使用酒精、苯或稀释剂等强烈的化学物质，否则可能会损坏设备表面。
- 请注意不要让水或护肤品等进入产品透气孔。
- 请勿将本设备放入洗碗机、烤箱、洗衣机中。
- 请勿将本设备暴露于阳光直射下，或放置于热水或沸水中。
- 为产品充电时，请注意充电部位不要沾有水分及护肤品等异物。可能导致产品损坏或发生火灾。

维护

I 处理装置

运送装置时

请保存原始的运输纸箱和包装材料。如果您需要运输装置，为了获得最大程度的保护，请重新包装装置，使用工厂最初的包装。

保持外表面清洁

- 请勿在装置附近使用挥发性液体，例如杀虫喷雾剂。
- 强压擦拭可能会损坏表面。
- 请勿让橡胶或塑料产品长时间接触本装置。

清洁装置

要清洁设备，请使用柔软的干布。如果表面非常脏，请用温和的清洁剂溶液蘸湿的软布轻轻擦拭。请勿使用酒精、汽油或稀释剂等强溶剂，否则可能会损坏装置表面。

申报故障前确认事项

解决问题


若使用产品过程中出现如下现象，请再次确认。可能并非故障。

现象	原因及解决方法	现象	原因及解决方法	现象	原因及解决方法
产品无法正常启动。	<ul style="list-style-type: none">• 请确认是否正确按下电源键。• 请按照使用说明书的指示为本产品充电。• 为本产品充电时，请确认电池状态指示灯是否亮起。• 请确认主机的皮肤接触电极与护理头是否紧密贴合皮肤。皮肤接触电极与护理头正确接触皮肤时，方可开始运行。	没有电。	<ul style="list-style-type: none">• 若电量不足需要充电，通过语音或效果音提示，电池状态指示灯闪烁，并自动关闭电源。• 电池放电。请为电池充电。• 请将充电适配器连接至电源供应装置。• 请确认充电器是否启动。• 请确认本产品标注的电压是否符合所在地区的主要电压。	无语音提示。	<ul style="list-style-type: none">• 产品下端配备扬声器。握住本产品时，请勿挡住扬声器孔。• 语音提示可能被关闭。请参考语音提示设置，打开语音提示。（→ 请参考第 15 页“设置语音”）

现象	原因及解决方法	现象	原因及解决方法
使用加热模式时，护理头未变热。	<ul style="list-style-type: none"> • 请确认是否为集中护理模式。 • 眼部护理 / 冰爽护理不支持加热模式。 • 请确认加热模式是否关闭。 • 请参考“集中护理下加热模式开启 / 关闭”设置加热模式。 (→ 请参考第 20 页“集中护理下加热模式开启 / 关闭”) 	冰爽护理头未变凉。	<ul style="list-style-type: none"> • 请确认透气孔是否堵塞。 • 请清理透气孔及其周边。 • 温度过高或过低的环境下，冰爽护理效果可能有所降低。 • 请在 20 ° C 至 30 ° C 温度范围内的场所使用。 • 请勿连续使用冰爽护理。若连续使用冰爽护理，为了维持冰爽护理头内部的适中温度，在语音提示后，产品电源可能会自动关闭。此种情况下，请等待 60 分钟后再使用。

附录

产品规格

一般事项	
电源 (电源适配器)	型号: ADS-12BA-06Y 05010EPCN C 制造商: 深圳欧陆通电子股份有限公司 输入: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 输出: 5 V  2.0 A
尺寸 (长 x 高 x 宽)	主机: 约 42.3 mm x 215 mm x 33.6 mm 支架: 约 115.8 mm x 148.5 mm x 113 mm
使用温度	5 °C 至 35 °C
使用湿度	0 % 至 90 %
建议使用次数	1 周 3 次 (以集中护理模式为准) <ul style="list-style-type: none">充满电后, 以集中护理 3 档为准, 可使用约 60 分钟。(以本公司内部测试结果为准)使用时间可能因电池保修期、环境温度或使用条件而异。

充电完成时间	3 小时以内 <ul style="list-style-type: none">5 V、2.0 A 充电适配器标准充电时间有可能因充电适配器规格、电池剩余量、环境温度或充电条件而异。
--------	--

- 设计和规格若有变更, 恕不另行通知。

