



LG Pra.L 全效提拉护理 (Total Tight Up Care)


型号名称
BLJ1

BLJ2




MBM66256556

充电

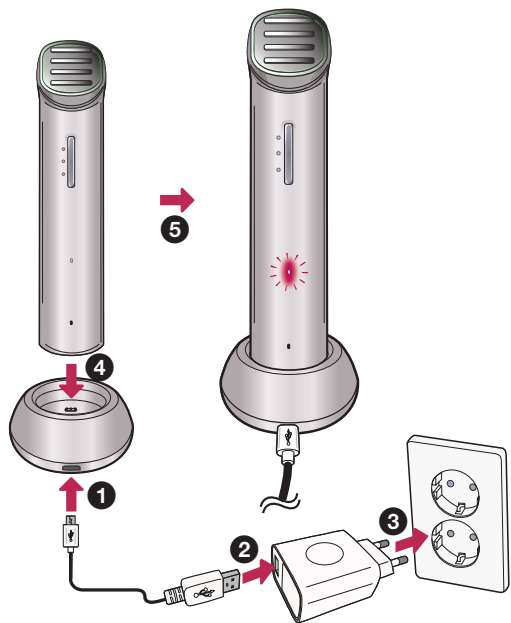


打开/关闭电源

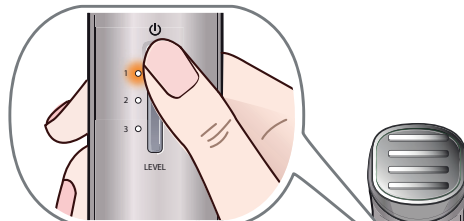


请短按 (电源) 按钮。

选择强度

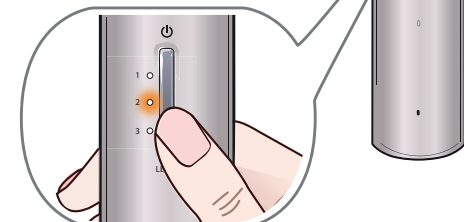


请短按LEVEL按钮。
(1 → 2 → 3)

语音提示功能设定

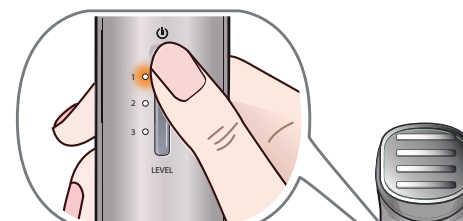


长时间按下 (电源) 按钮 (直到指南)。(语音提示→效果音提示→关闭提示 (静音))

语言设置

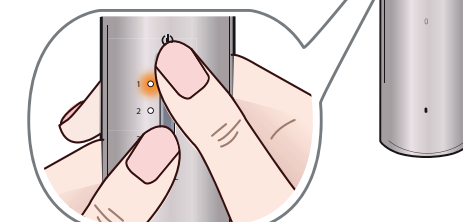

同时长按 (电源) 按钮和LEVEL按钮 (直到指南)。(韩语→英语→汉语)

模式选择

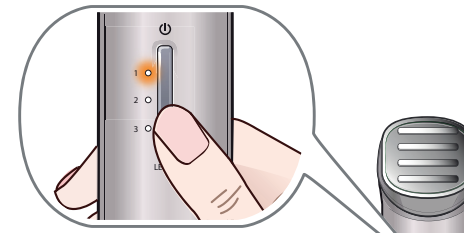

长时间按等级按钮 (直到指南)
(综合模式 → 紧肤专用模式 → 提拉专用模式)


- 综合模式: 紧致模式+提拉模式
- 紧肤专用模式: 有助于改善肌肤 (皮肤) 真皮层弹性
- 提拉专用模式: 刺激皮肤组织和肌肉, 帮助面部提升

使用注意事项

- 使用装置时，根据个体皮肤状态差异，可能会产生不同的过敏症状。
如产生持续过敏症状，请减少使用次数。
- 如发生以下情况，建议在专业人士指导下使用设备。
 - 过敏性肤质、痤疮、皮炎，皮肤治疗、整容手术或脱发治疗手术后
 - 佩戴心脏起搏器、器械植入或金属假肢装置
- 仅可用于面部治疗，不建议用于身体。
- 运行时眼睛不要直视LED光线。过度暴露在光线下会引起眼睛损伤。
- 不要直接暴露紫外线防护帽的LED灯。过度暴露在光线下会引起眼睛和皮肤的损伤。
- 建议1周使用2次。各部位连续使用2次以上时，皮肤有可能出现发热感。
- 在使用该装置之前，如果您目前正在接受皮肤科相关治疗或出现皮肤问题，请咨询皮肤科医生，然后使用它。
- 孕期、月经期、哺乳期妇女不宜使用。（不稳定的荷尔蒙平衡可能导致短暂的皮肤问题）。
- 在颈部使用本仪器时，请避开甲状腺所在的悬雍垂部位使用。
- 请勿将本产品用于此说明书所列内容之外的用途。
- 根据皮肤类型个体的差异，如您感到皮肤刺痛时，请从1级开始使用。
- 请注意使用含有下列成分的化妆品，因为它可能会降低效果。（例如：酒精、防晒霜、视黄醇、油）

綜合模式


- ※ 通过高频和微细电流等的阶段性护理，帮助实现弹性改善和提拉效果。
- ※ 主要功能：紧致模式（RF（高频），红色LED）+ 提拉模式（微电流）

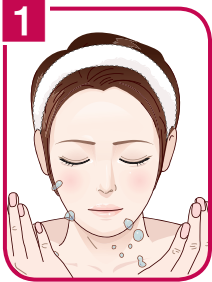


请彻底卸妆后洁面。



请涂抹大量补水凝胶。
（使用部位或仪器头部）

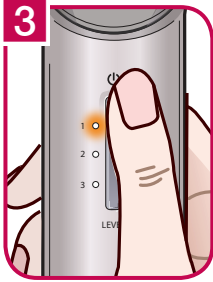


打开电源，綜合模式从
第1阶段开始。

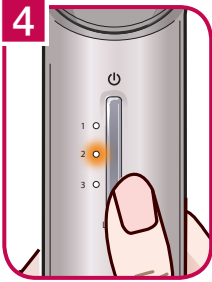

请短按LEVEL按钮，选
择强度。

ⓘ 长按LEVEL按钮（直到指南）更改模式
（綜合模式 → 紧肤专用模式 → 提拉专用模式）

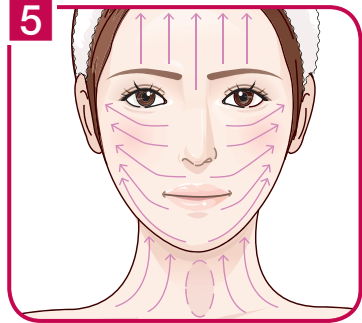

请确认护理方法和顺序后，在所需部位进行按摩。

- ※ 可护理部位：
额头 / 两颊 / 下颌 / 颈部
- ⚠ 在颈部使用本仪器时，请避开甲状腺所在的悬雍垂部位使用。 如果您患过严重的甲状腺相关疾病或正在接受治疗，建议您在咨询专科医生后再使用。

※ 护理方法
请将仪器贴需要护理的部位。沿着（额头或两颊等）箭头方向，直到出现效果音为止，慢慢地向上提拉并按摩。

- 效果音每隔5秒钟响起。

※ 护理顺序（3次，1次6分钟，共启动18分钟。）

- ❶ 第一次护理部位（6分钟）：紧肤模式3分钟、提拉模式3分钟按摩
- ❷ 第二次护理部位（6分钟）：紧肤模式3分钟、提拉模式3分钟按摩
- ❸ 第三次护理部位（6分钟）：紧肤模式3分钟、提拉模式3分钟按摩



清洁后，请使用温水彻底洗净面部。