


사용 목적 알아보기


이 제품은 아래의 분류에 따르는 안드로겐성 탈모증의 탈모 치료에 사용하는 기구입니다.

- 노우드 해밀턴 (Norwood Hamilton) 분류 : IIa에서 V에 해당하는 안드로겐성 탈모증 남성
- 루드윅 (Ludwig) 분류 : I에서 II인 안드로겐성 탈모증 여성
- BASP Specific Type 분류 : V1에서 V2, F1에서 F2인 안드로겐성 탈모증
- 피츠패트릭 (Fitzpatrick) 피부 유형 분류 : I에서 IV에 해당하는 피부 유형


노우드 해밀턴 (Norwood Hamilton) 분류

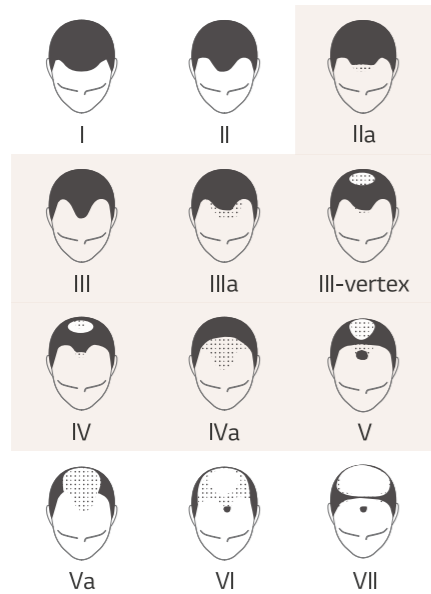

루드윅 (Ludwig) 분류

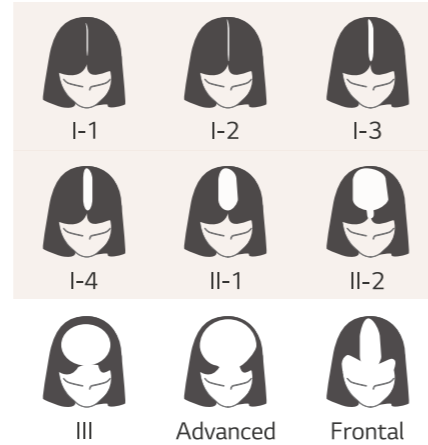

BASP Specific Type 분류

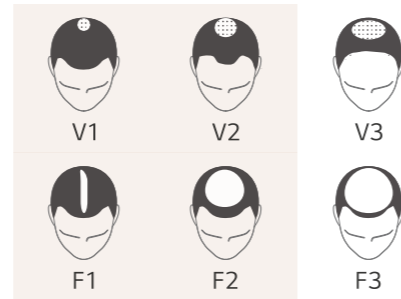

피츠패트릭 (Fitzpatrick) 피부 유형 분류



* 이 제품은 의료 기기입니다.



COV37374103
QSG-01 (Rev. 07)

2022. 12.

2212_Rev04

LG Pra.L

메디케어



QR 코드를 스캔하여 자세한 사용 방법을 동영상으로 확인하세요.



사용을 위한 자세한 안내사항은 동봉된 사용설명서 또는 LG전자 홈페이지의 WEB 매뉴얼을 참고하세요. 스마트 기기로 QR코드를 인식하면 앱으로 사용설명서를 빠르게 확인할 수 있습니다. 이 제품은 의료기기입니다.


HGN1

사용 시 주의 사항 알아보기

- 권장 사용 횟수 : 1주일 3회
 - 2일 동안 연속 사용은 제한합니다.
 - 권장 시간보다 오래 사용하면 열이 나는 느낌이 있을 수 있습니다.
- 두피에 상처 또는 질환이 있거나 햇빛 알레르기와 같은 광과민성 질환이 있는 사람은 사용하지 마세요.
- 두피 전용 관리기로 다른 부위 사용은 권장하지 않습니다.
- 임신, 생리, 수유 중인 여성은 사용을 권장하지 않습니다.
- 이 제품 사용 시 개인별 두피 상태에 따라 다양한 형태의 두피 자극이 있을 수 있습니다. 이러한 자극이 있을 경우 사용 횟수를 줄여주세요.
- 다음과 같은 경우에는 반드시 전문의와 상담한 뒤 사용하세요.
 - 두피 질환, 이마 및 모발 관련 시술 후 회복 기간인 경우.
 - 안과 질환이 있거나 최근에 안과 관련 수술한 경우.
 - 알레르기 체질로 피부가 민감한 자.
 - 악성 종양, 급성 질환, 고열, 심혈관 질환, 내분비 이상 등의 질환이 있거나 신체에 이상이 있는 경우.
 - 인체 내부 장착형 전자 기기 사용자이거나 레이저/LED 불빛이 닿는 인체 부위에 보형물이 있는 경우.
 - 참기 힘든 가려움, 눈시림, 어지러움, 두통, 피부 통증, 감염, 피부 질환, 홍반, 여드름, 피부 건조가 발생할 경우.
 - 파마, 헤나, 염색, 탈색과 같은 헤어 또는 모발 미용시술 직후에는 일주일간 사용을 피해주세요.
- 이 사용설명서에 나와 있는 내용 이외의 용도로 기기를 사용하지 마세요.

케어 준비하기

- 레이저/LED 빛 조사에 방해 되지 않게 머리카락과 두피를 청결하게 하고 사용하는 것을 권장합니다. (헤어 스타일링 제품, 가발 등은 제거 후 사용하세요.)
- 샤워 또는 머리를 감은 후에 기기 사용하는 경우 머리카락과 두피를 충분히 말리고 사용하세요 (기기 사용 중 생기는 두피 열감이나 따끈한 현상입니다.)
- 편안한 자세에서 메디헤어를 착용하여 주세요.

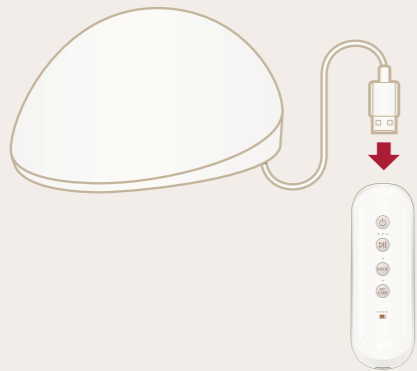


본체와 컨트롤러 연결하기

LG 프라임 메디헤어 본체와 컨트롤러를 연결하세요.

- 기기 사용 전, 컨트롤러가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 충전이 완료된 다음에 사용하세요.
- ※ 반드시 제공된 어댑터를 사용하세요.

사용하기 1주일 3회 사용 권장

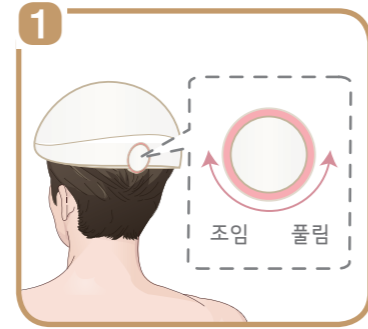


본체를 착용한 다음 본체 뒷면의 밴드 조절 다이얼을 이용하여 머리 크기에 맞게 조절하세요.

※ 리어 쿠션 패드 (사이즈 조절용 보조 패드)



- 본체의 쿠션 패드가 맞지 않아 머리에 꼭 맞게 착용하기 어렵다면, 구성품으로 추가 제공되는 두꺼운 패드로 교체하여 사용하세요.

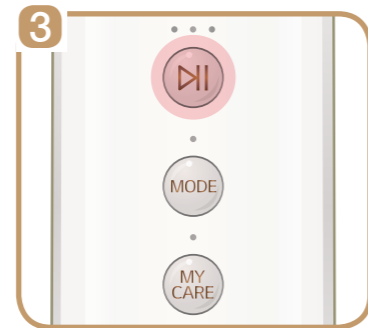

원하는 케어 모드를 선택한 다음 시작/일시 정지 버튼을 눌러 케어를 시작하세요.


- MODE 설정 : MODE 버튼을 짧게 눌러 모드 변경
- (토탈 케어 → 프론트 케어 → 탭 케어)
- MY CARE (마이케어) : 사용자의 탈모 유형에 맞는 케어 모드 추천

※ 케어를 시작하면 종료 전까지 다른 모드로 변경할 수 없습니다.



컨트롤러의 전원 버튼을 눌러 이 기기의 전원을 켜세요.

MY CARE (마이케어) 기능 사용하기

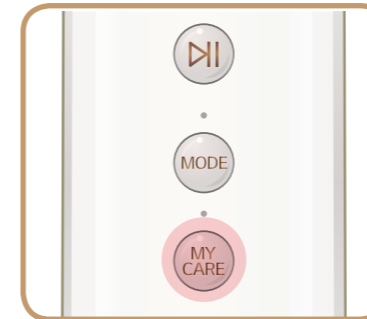

전원을 켜 상태에서 MY CARE(마이케어) 버튼을 짧게 누른 후 시작/일시 정지 버튼을 짧게 누르세요.
MY CARE (마이케어)는 탈모 유형을 측정하여 다음 탈모 유형에 맞는 케어 모드를 추천한 뒤 자동으로 저장합니다.

※ 시작/일시 정지 버튼을 누르면 케어가 일시 정지됩니다. 케어 일시 정지 상태가 5분 이상 지속되면 전원이 자동으로 꺼집니다.


※ 저장된 MY CARE (마이케어)의 탈모 유형을 다시 측정하고 싶을 때는 MY CARE (마이케어) 버튼을 약 5초 동안 길게 누르세요.

케어 모드	상태
토탈 케어 (27분)	<p>모든 부위를 종합적으로 케어합니다. 전반적인 케어를 원하거나, 전체 모발의 굵기와 밀도가 떨어지는 분들을 위한 모드입니다.</p> <p>9분 (앞머리/윗머리) → 9분 (윗머리/정수리) → 9분 (앞머리/정수리)</p>
프론트 케어 (18분)	<p>앞/윗머리 중심으로 케어합니다. 앞머리선이 뒤로 밀리고, 윗머리 모발의 굵기와 밀도가 떨어지는 분들을 위한 모드입니다.</p>
탭 케어 (18분)	<p>윗머리/정수리 중심으로 케어합니다. 윗머리와 정수리 부분의 모발의 굵기와 밀도가 떨어지는 분들을 위한 모드입니다.</p>

※ 케어 모드에 대한 설명은 사용설명서 '케어 모드(MODE) 사용하기'를 참고하세요.

※ 남성, 여성에 따른 탈모 유형은 뒷면 또는 사용설명서의 '사용 목적 알아보기'를 참고하세요.

케어 모드(MODE) 사용하기

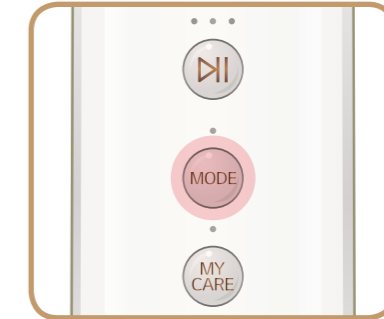

전원을 켜 상태에서 MODE 버튼을 짧게 누를 때마다 케어 모드가 바뀝니다. (토탈 케어 → 프론트 케어 → 탭 케어) 원하는 모드를 설정한 다음 시작/일시 정지 버튼을 짧게 누르면 케어가 시작됩니다.

음성 안내 설정하기



전원을 켜 상태에서 전원 버튼과 MODE 버튼을 동시에 약 3초씩 길게 누를 때마다 음성 안내 설정이 바뀝니다. (음성 안내 → 효과음 → 가이드를 끕니다 (무음))

언어 설정하기



전원을 켜 상태에서 전원 버튼과 시작/일시 정지 버튼을 동시에 약 3초씩 길게 누를 때마다 사용 언어가 바뀝니다.

※ 기기의 전원을 끌 때, 전원 버튼을 눌러 전원을 끄세요. 이때 케어 모드, 언어, 음성 안내 등 설정된 정보가 저장됩니다.