

제품의 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요.
제품 보증서도 함께 들어 있으니 잘 보관하세요.

모델
BLP1



모바일 앱으로도 사용설명서 및 다양한 프라엘 관련 정보를 받아볼 수 있습니다.
구글플레이스토어 또는 앱스토어에서 "프라엘케어"를 검색하세요. 스마트기기로 QR코드를 인식하면 빠르게 확인할 수 있습니다. (Android, iOS 통합 QR code)



자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지를 참조하세요.
스마트 기기로 QR 코드를 인식하면 빠르게 찾을 수 있습니다.



COV37314802
2210_Rev05

www.lge.co.kr

고유 기능 알아보기

본 기기는 탄력케어를 위한 고주파 / 미세전류 복합 기술과 화장품 흡수 촉진을 위한 소노포레시스 / 이온토포레시스의 복합 기술이 적용된 제품입니다.

※ 고주파 : 피부 조직 내부에 심부열을 발생시켜 탄력 개선을 유도하는 기술

※ 미세전류 : 피부 조직 및 근육을 자극하여 탄력 개선에 도움을 주는 기술

- 미세전류란? 생체에 흐르는 전기와 유사한 1000 μ A 미만의 미약한 전류

※ 소노포레시스 : 초음파로 화장품의 유효 성분을 피부 속으로 전달하는 기술

※ 이온토포레시스 : 피부에 전위차를 주어 화장품의 유효 성분을 침투시키는 기술

인텐시브 케어

피부 탄력 개선과 화장품 흡수 촉진을 “하나의 제품”으로 “하나의 헤드”에서 “동시에” 제공합니다.


아이 케어

연약한 눈가 피부를 위한 “저자극 복합 탄력 케어 기술”과 “눈가에 부드럽게 밀착 케어하는 전용 케어 헤드”로 동안 눈매를 만들어줍니다.

쿨링 케어

쿨링케어로 피부 모공을 축소시켜 줍니다.

구성품 확인하기

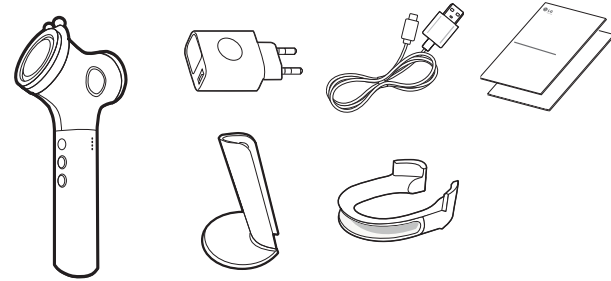


제품 들여다보기



- 1 아이 케어 헤드
- 2 인텐시브 케어 헤드
- 3 인텐시브 / 아이 케어 전원 버튼
- 4 인텐시브 / 아이 케어 MODE 버튼, MODE 표시등
- 5 인텐시브 / 아이 케어 LEVEL 버튼, LEVEL 표시등
- 6 쿨링 케어 헤드
- 7 쿨링 케어 전원 버튼
- 8 쿨링 케어 LEVEL 버튼, LEVEL 표시등
- 9 피부 접촉 전극
- 10 통풍 구멍
- 11 배터리 상태 표시등

충전하기

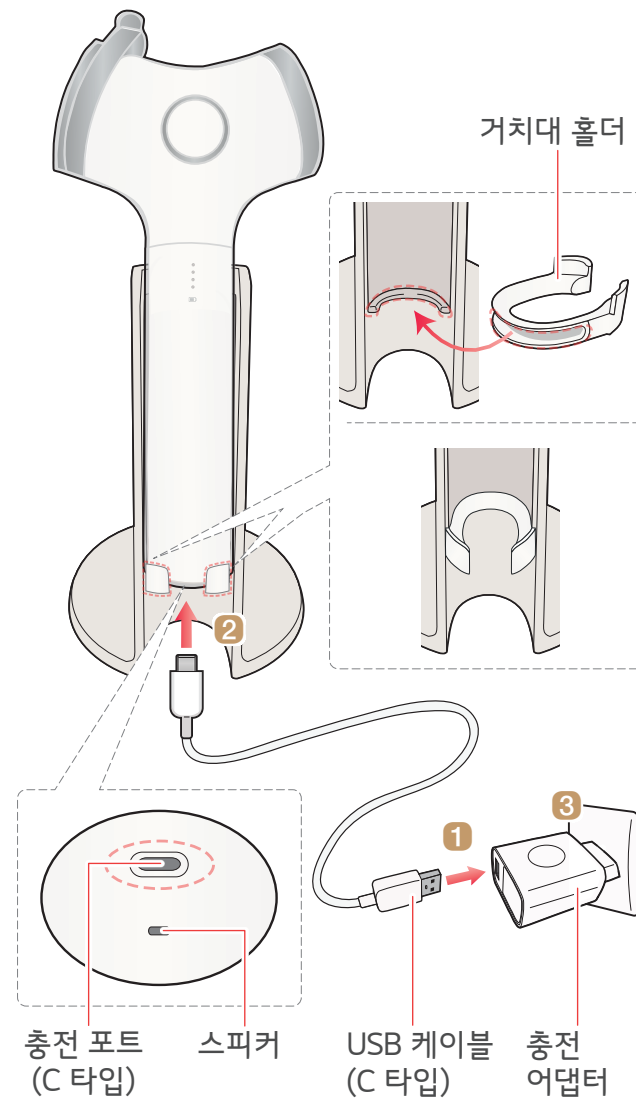

충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.

제품규격 확인하기

일반 사항	
전원 (전원 어댑터)	모델 : ADS-12BA-06Y 05010EPK C 제조사 : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 입력 : 100 ~ 240 V ~ 50 / 60 Hz 출력 : 5 V $\equiv$ 2.0 A
크기 (길이 x 높이 x 폭)	본체 : 약 42.3 mm x 215 mm x 33.6 mm 거치대 : 약 115.8 mm x 148.5 mm x 113 mm
사용 온도	5 °C 에서 35 °C
사용 습도	0 % 에서 90 %
권장 사용 횟수	1주일 3회 (인텐시브 케어 모드 기준) • 완전히 충전한 다음 인텐시브 케어 3단계 기준으로 약 60분 정도 사용할 수 있습니다. (자사 내부 실험 결과 기준) • 사용 시간은 배터리 보증 기간, 주변 온도 또는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
완전 충전 시간	3시간 이내 • 5 V, 2.0 A 충전 어댑터 기준 • 충전 시간은 충전 어댑터 사양, 배터리 잔량, 주변 온도 또는 충전 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
KC	
모델명	BLP1
제품명(기자재명칭)	피부관리기
상호명/제조사	엘지전자(주)
제조국가	중국
식별부호	R-R-LGE-BLP1

- 본 사용설명서의 제품 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다. 본 사용설명서에 표시된 내용은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 명칭 및 전원 공급을 포함한 안전 표시 사항은 제품의 겉이나 아래에 부착된 라벨을 참조하세요.
- 본 제품은 LG전자 서비스 기사만 내부를 열어 볼 수 있도록 고안되었습니다. 소비자가 임의로 제품의 덮개를 열거나 수리를 하는 것은 위험하니 LG전자 서비스 기사에게 의뢰하세요.
- 서비스 부품은 내부에 포함되어 있지 않습니다.

사용 시 주의사항

피부 케어 전 주의사항


- 얼굴 전용 제품이므로 신체의 다른 부위에 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
- 이 제품을 사용했을 때 개인별 피부 상태에 따라 피부가 붉어지거나 따끔거림 등 피부 자극이 있을 수 있습니다. 이러한 자극이 지속될 경우 즉시 사용을 중단하고 피부과 전문의와 상담한 뒤 사용하세요.
- 얼굴에 피부질환이 있거나 피부염이 자주 발생하는 사람은 전문의와 상담한 뒤 사용하세요.
- 햇빛 알레르기 와 같은 광과민성 질환자는 사용하지 마세요.
- 제품과 함께 사용하는 화장품이 부족하면 따끔거림 등 피부 자극이 느껴질 수 있습니다.
- 권장 사용 주기보다 더 많이 사용하면 피부에 자극이 생길 수 있습니다. (인텐시브 케어 / 아이 케어: 1주일 3회, 쿨링 케어: 1일 1회)
- 아래 성분이 포함된 화장품 사용 시 효과를 감소시킬 수 있으므로 사용에 유의해주세요. (예시: 변성알코올, 자외선 차단제, 레티놀, 오일 성분)
- 제품의 헤드를 한 곳에 멈춘 상태로 사용하지 말고, 본 사용설명서의 가이드에 따라 옮겨가며 사용하세요.
- 아이 케어 헤드는 눈 주변 / 입가 부위 사용을 권장합니다.
- 쿨링 케어는 피부미용 목적으로만 사용하세요.
- 피부가 접촉하는 헤드 부분에 흠집이나 파손이 발생할 때는 사용을 중단하고, 서비스 센터에서 서비스를 받으세요.

안전 주의사항

- 제품이 물에 빠졌을 때는 케이블에 손을 대지 말고 충전 어댑터를 즉시 분리하세요.
- 반드시 제공된 충전 어댑터를 사용하세요.
- 다른 충전 어댑터를 사용할 경우 고장의 원인이 될 수 있으며 보상 수리를 받을 수 없습니다.
- 작동 중 LED 불빛을 직접적으로 쳐다보지 마세요.
- 제품을 충전할 때에는 충전 부위에 물기 및 화장품 등의 이물질이 묻어 있지 않도록 주의하세요. 제품이 손상되거나 화재가 발생할 위험이 있습니다.
- 쿨링 케어를 연속해서 하지 마세요. 쿨링 케어를 연속하여 사용하면 쿨링 헤드 내부 적정 온도를 유지하기 위해 음성 안내 뒤 제품의 전원이 자동으로 꺼질 수 있습니다. 이 경우 60분 이후 사용해주세요.

① 안전 및 주의사항은 별도 설명서를 참조하세요.


음성 안내 설정하기

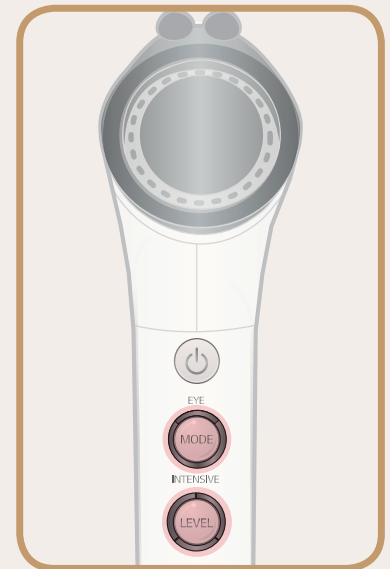

인텐시브 / 아이 케어의 전원을 켜 상태에서 인텐시브 / 아이 케어 MODE 버튼과 인텐시브 / 아이 케어 LEVEL 버튼을 동시에 약 3초씩 길게 누를 때마다 음성 안내 설정이 바뀝니다.

- 음성 안내 → 효과음 → 가이드를 끕니다 (무음)

언어 설정하기

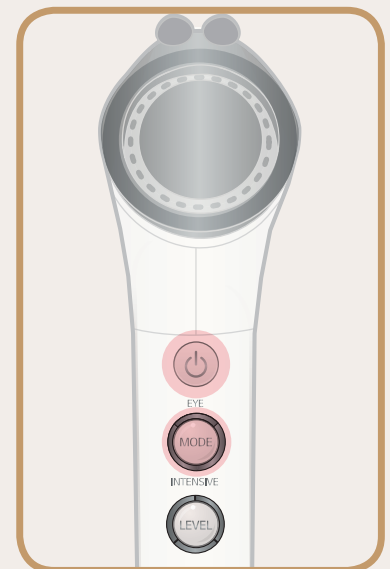


인텐시브 / 아이 케어의 전원을 켜 상태에서 인텐시브 / 아이 케어 전원 버튼과 인텐시브 / 아이 케어 MODE 버튼을 동시에 약 3초씩 길게 누를 때마다 사용 언어가 바뀝니다.

케어 모드 알아보기

케어명	사용 헤드	작동 상태 LED
인텐시브 케어 (6분)		EYE MODE INTENSIVE
아이 케어 (3분)		EYE MODE INTENSIVE
쿨링 케어 (3분)		

인텐시브 케어에서 온열 모드 켜짐 / 꺼짐

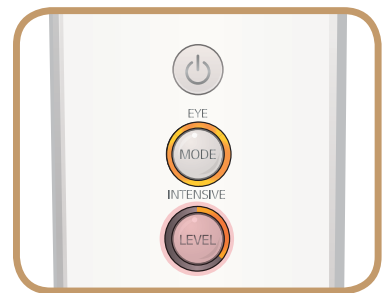

인텐시브 / 아이 케어 전원을 켜 상태에서 인텐시브 / 아이 케어 LEVEL 버튼을 약 3초씩 길게 눌러 온열 모드 (켜짐 / 꺼짐)를 선택하세요.

- 아이 케어, 쿨링 케어에서는 온열 모드가 지원되지 않습니다.


※ 제품의 인텐시브 / 아이 케어 전원을 껐다 켜면 자동으로 온열 모드가 '켜짐'으로 설정됩니다.
※ 단, 온열 모드에 의한 열감이 심할 경우 꺼짐으로 사용하세요.
※ 온열 모드는 온도를 변경할 수 없습니다.

인텐시브 케어 (온열 모드는 인텐시브 케어에서 온열 모드 켜짐 / 꺼짐을 참조하세요)

1 주일 3 회 사용 권장 기존에 사용하던 화장품이나 피부 타입에 맞는 화장품 사용 권장 (갈바닉 전용 겔 또는 비타민 세럼 등)



깨끗이 세안한 뒤, 케어를 원하는 부위마다 충분히 화장품을 발라 주세요.

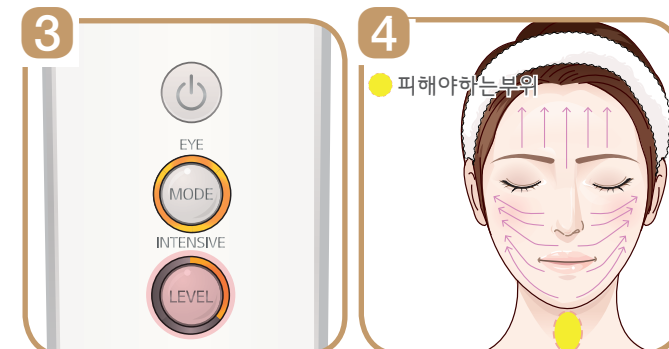

인텐시브 / 아이 케어 LEVEL 버튼을 눌러 본인에 맞는 인텐시브 케어의 강도 (1~3 단계)를 선택하세요.

그림과 같이 이마 / 볼 / 턱 부위에 인텐시브 케어 헤드를 천천히 끌어올리면서 6분 동안 마사지 하세요.
※ 눈 주위는 아이 케어 모드를 사용하세요.

아이 케어

1 주일 3 회 사용 권장 기존에 사용하던 화장품이나 피부 타입에 맞는 화장품 사용 권장 (갈바닉 전용 겔 또는 비타민 세럼 등)



깨끗이 세안한 뒤, 케어를 원하는 부위에 충분히 화장품을 발라 주세요.




인텐시브 / 아이 케어 MODE 버튼으로 아이 케어 모드를 선택 후 인텐시브 / 아이 케어 LEVEL 버튼으로 강도 (1~3 단계)를 선택하세요.

그림과 같이 눈 주변 / 입가 부위에 아이 케어 헤드를 화살표 방향으로 천천히 원을 그리며 움직이면서 3분 동안 마사지 하세요.

쿨링 케어

1 일 1 회 사용 권장, 인텐시브 케어 / 아이 케어 후 쿨링 케어를 하면 피부 진정에 도움을 줍니다.

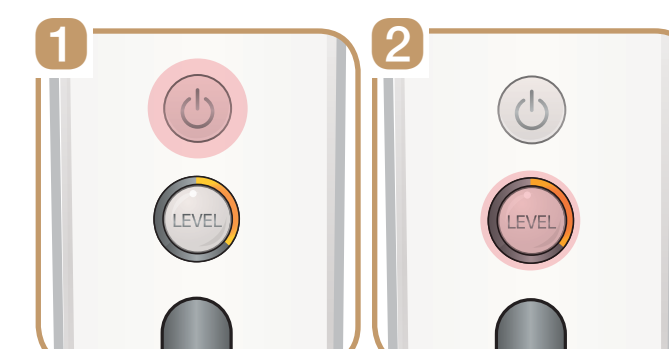

쿨링 케어 전원 버튼을 눌러 제품을 켜세요.

쿨링 케어 LEVEL 버튼을 눌러 본인에 맞는 쿨링 케어의 온도 (1~3 단계*)를 선택하세요.


*단계 높을수록 온도 낮아짐



그림과 같이 원하는 부위에 쿨링 케어 헤드를 천천히 움직이면서 3분 동안 마사지 하세요.

※ 쿨링 케어를 연속해서 하지 마세요. 쿨링 케어를 연속하여 사용하면 쿨링 헤드 내부 적정 온도를 유지하기 위해 음성 안내 뒤 제품의 전원이 자동으로 꺼질 수 있습니다. 이 경우 60분 이후 사용해주세요.

인텐시브 케어 모드 사용 시 주의사항

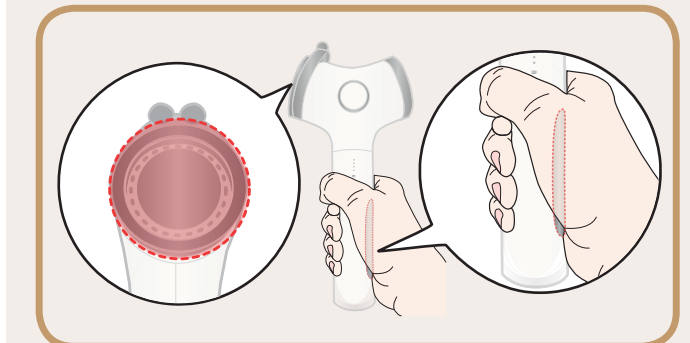

제품 뒷면의 피부 접촉 전극과 손바닥이 닿도록 가볍게 감싸 주세요. 동시에 표시된 인텐시브 케어 헤드 부분이 얼굴 피부에 잘 접촉되어야 제품이 작동합니다.

Q&A

Q 제품을 어떻게 관리해야 하나요?

A 케어한 다음, 제품 또는 제품의 헤드에 화장품 등의 이물질이 남아있다면, 그 부분을 물티슈나 마른 천으로 닦은 뒤 습기가 없는 서늘한 곳에서 말려주세요.

! 알코올, 벤젠, 아세톤과 같은 강한 화학제품 등은 사용하지 마세요.

제품의 통풍 구멍으로 물이나 화장품 등이 들어가지 않도록 주의하세요.