



언어 설정

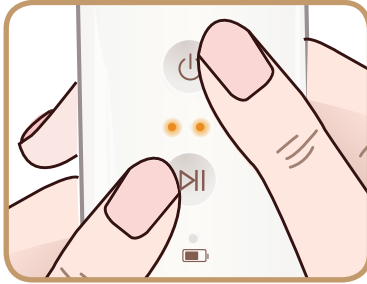


전원을 켜 상태에서
 ⏻ (전원)버튼과
 🗨️ (시작/일시정지)
 버튼을 변경할 때마다
 동시에 약 3초씩 길게
 누르세요.
 (한국어 → 영어 →
 중국어)

음성 가이드 설정

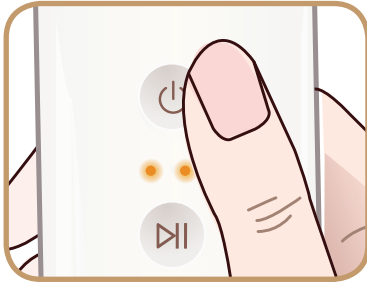


전원을 켜 상태에서
 ⏻ (전원)버튼을
 변경할 때마다 약 5
 초씩 길게 누르세요.
 (음성 가이드 →
 효과음 가이드 →
 가이드 끄 (무음))

전원 켜기 / 끄기

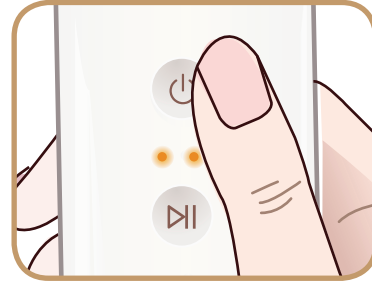

⏻ (전원)버튼을 짧게
 누르세요.


시작하기 / 일시정지하기

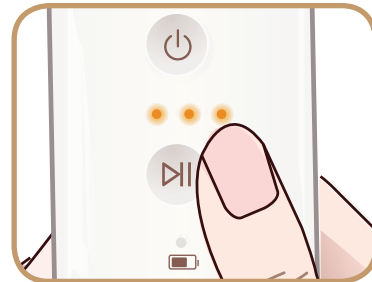


▶ (시작/일시정지)
 버튼을 짧게 누르세요.

사용 시 주의사항

- 본 기기 사용시 개인별 피부 상태에 따라 다양한 형태의 피부 자극이 있을 수 있습니다. 이러한 자극이 있을 경우 사용 횟수를 줄여주세요.
- 아래의 경우에 대해서는 전문의 상담 후 사용을 권장합니다.
 - 알레르기 피부, 여드름, 피부염, 피부시술, 성형, 탈모시술
 - 심장 박동기 착용 및 장치 이식 또는 금속 보철장치 착용
- 얼굴 전용관리기로 바디 관리 사용은 권장하지 않습니다.
- 작동 중 LED 불빛을 직접적으로 응시하지 마세요. 지나치게 오래 불빛에 노출될 경우, 안구에 손상을 입을 수 있습니다.
- 제품은 1일 1회 사용을 권장합니다. 2회 이상 사용 시 피부에 발열감이 생길 수 있습니다.
- 현재 피부과 관련 치료 중이거나 피부 상태에 이상이 있는 경우, 기기 사용 전에 피부과 전문의와 상담 후 사용하세요.
- 임신, 생리, 수유중인 여성은 사용을 권장하지 않습니다. (호르몬 밸런스가 불안정하여 일시적으로 피부 트러블이 심해질 수 있습니다.)
- 본 사용설명서에 나와 있는 내용 이외의 용도로 기기를 사용하지 마세요.
- 아래 성분이 포함된 화장품 사용 시 효과를 감소 시킬 수 있으므로 사용에 유의해주세요. (예시 : 변성알코올, 자외선 차단제, 레티놀, 오일 성분)

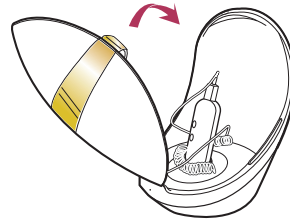

거치대(별매품)에 컨트롤러를 삽입 후, Derma LED 마스크의 케이블을 컨트롤러 주위로 감아 정리한 뒤 본 기기를 거치하세요.

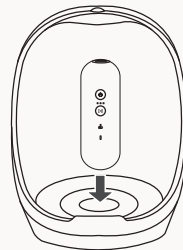

컨트롤러를 거치대(별매품)에 충전 시 버튼이 앞으로 향하도록 거치하세요.


반대로 했을 경우 충전이 되지 않습니다.



MBM67453001

2001_Rev01


사용하기  1일 1회 사용 권장  기존에 사용하던 화장품이나 피부 타입에 맞는 화장품 사용 권장

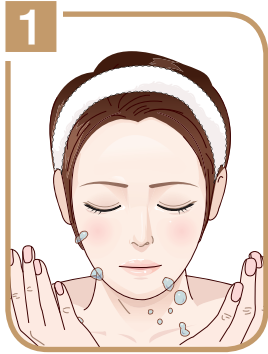


세안하세요.




본인 피부에 맞는 스킨/로션을 바르세요.

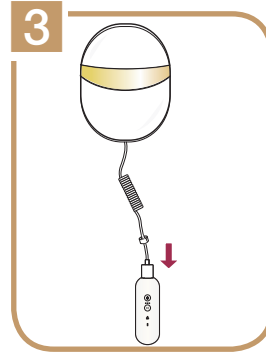

Derma LED 마스크의 케이블을 컨트롤러 포트에 연결하세요.

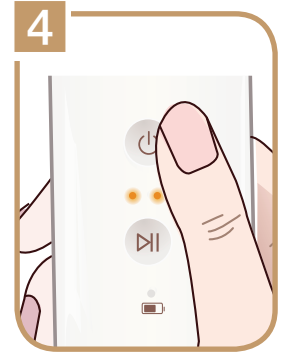

⏻ (전원)버튼을 눌러 전원을 켜세요.

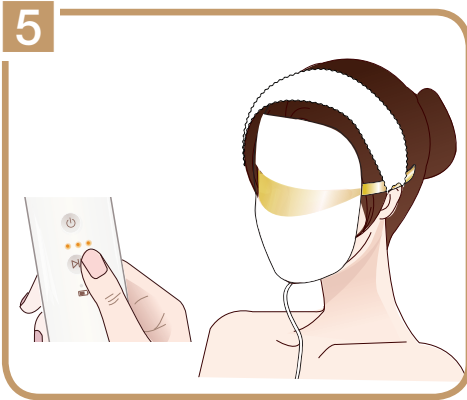


안경을 쓰듯이 Derma LED 마스크를 착용 후, **▶** (시작/일시정지) 버튼을 눌러 케어를 시작하세요.

❗ 마스크 착용 후 동작이 되지 않을 시, 착용부 가운데에 있는 근접센서에 피부를 밀착하여 주세요.

마스크 밴드 착용 가이드 (선택사항)

착용 시 마스크가 흘러내릴 경우, 제공된 마스크 밴드를 사용하여 Derma LED 마스크를 고정하세요. 마스크 밴드는 아래 그림과 같이 착용하세요.

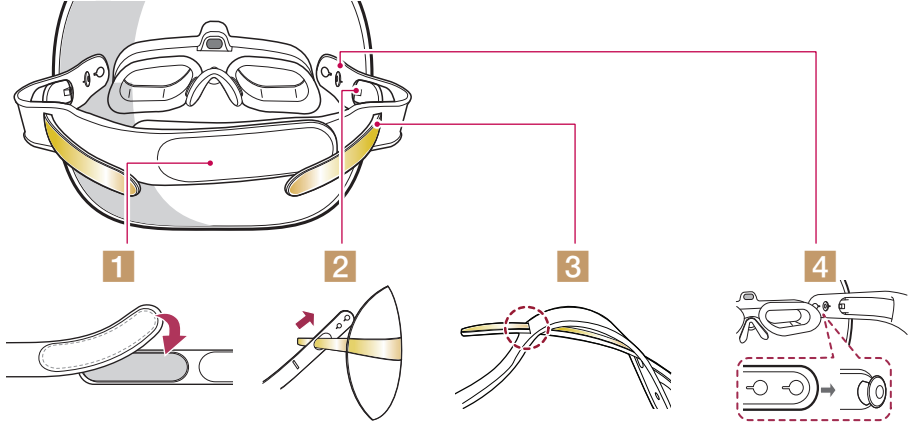

반대편 착용부 다리에도 동일한 방법으로 밴드를 끼우세요.

- ❗ 머리둘레에 맞게 후크의 위치 또는 마스크 밴드의 벨크로를 조절하여 사용하세요.
- 밴드 착용 중 압박감이 느껴질 경우, 밴드를 느슨하게 조절하세요. 마스크를 누운 자세로 사용할 경우에는 밴드착용 없이 사용하는 것을 권장합니다.

