



**LG Pra.L**  
电离子助推器 (Galvanic Ion Booster)

型号名称  
BBL1



MBM67016512

1905\_Rev01

### 清洁模式 (CLEANSING)

#### 使用方法

建议每天使用1次

使用水溶性产品，  
如保湿凝胶




请彻底卸妆后洁面。




请使用补水凝胶。



请打开电源。

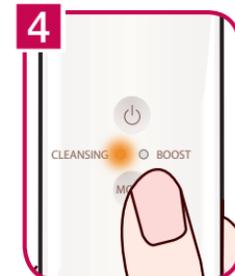

请按下 MODE 按钮，  
选择 CLEANING  
(清洁) 模式。

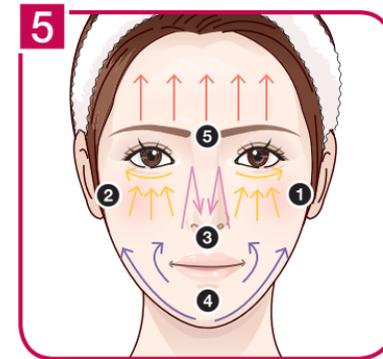

请根据语音提示功能，按照编号顺序向箭头方向清洁各部位。

- ➔ ➊ 左脸颊 (30秒)
- ➔ ➋ 右脸颊 (30秒)
- ➔ ➌ 鼻子 (45秒)
- ➔ ➍ 下巴 (30秒)
- ➔ ➎ 额头 (45秒)



清洁后，请使用温水  
彻底洗净面部。

### 促进吸收模式 (BOOST)

#### 使用方法

建议每天使用1次

使用以前使用的护肤品  
或适合您肤质的护肤品




请彻底卸妆后洁面。




请涂抹护肤品  
(维生素C精华等)。




请打开电源。

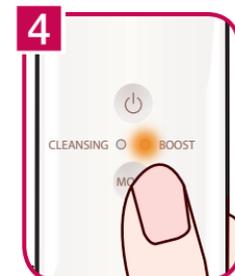

请按下 MODE 按钮，  
选择 BOOST  
(促进吸收) 模式。

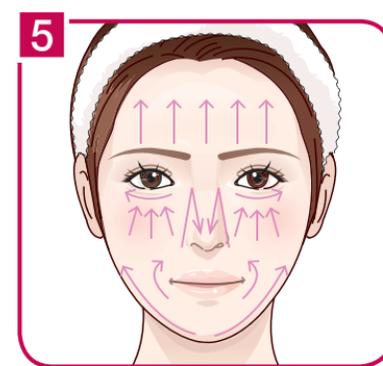

请按箭头方向在需要护理的部位  
护理3分钟。

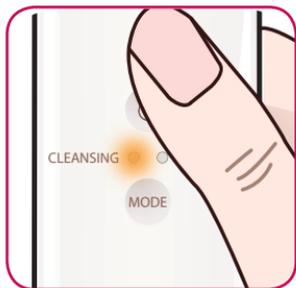

### 语音指导设置

在电源打开的情况下，每次更改时按住⏻(电源)按钮约 5 秒。(语音提示 → 效果音提示 → 指导关闭(静音))



### 设置语言

在电源打开的情况下，每次更改时同时按住⏻(电源)和 MODE 按钮约 3 秒。(韩语 → 英语 → 汉语)


### 选择模式 (CLEANSING / BOOST)



请短按 MODE 按钮。  
(CLEANSING → BOOST)

- **清洁模式 (CLEANSING):**  
为了皮肤更加洁净在使用促进吸收模式之前使用效果更佳。  
主要功能：加热、离子(+)
- **促进吸收模式 (BOOST):**  
通过复合性的促进吸收功能，帮助护肤品中的有效成分渗透的模式。  
主要功能：加热、离子(-)、超声波

### 充电

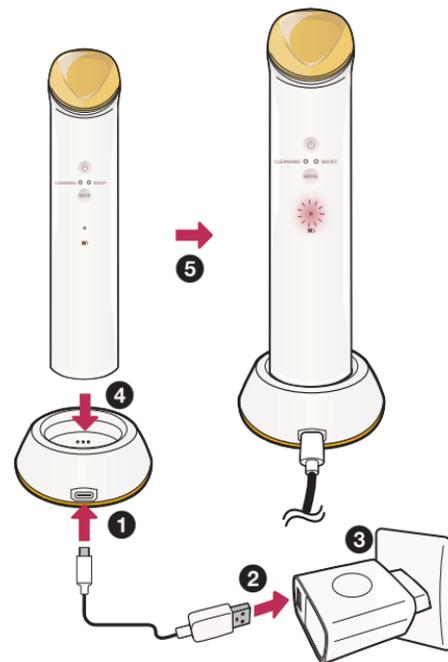

### 使用注意事项

- 使用装置时，根据个体皮肤状态差异，可能会对皮肤产生刺激，如果皮肤持续产生刺激性过敏症状，请减少使用次数。
- 如发生以下情况，建议在专业人士指导下使用设备。
  - 过敏性肤质、痤疮、皮炎，皮肤治疗、整容手术或脱发治疗手术后
  - 佩戴心脏起搏器、器械植入或金属假肢装置
- 仅可用于面部治疗，不建议用于身体。
- 建议每种模式1天使用1次。使用2次以上时，皮肤有可能出现发热感。
- 在使用该装置之前，如果您正在接受皮肤科相关治疗或出现皮肤问题，请先咨询皮肤科医生。
- 不推荐怀孕、月经、哺乳期妇女使用。(不稳定的荷尔蒙平衡可能会引起暂时性的皮肤问题。)
- 请勿将本产品用于此说明书所列内容之外的用途。
- 请注意使用含有下列成分的护肤品，因为它可能会降低效果。(例如：酒精、防晒霜、视黄醇、油)