



LG Pra.L 光彩透亮LED面罩 (Derma LED Mask)

型号名称
BWL1





MBM67237033

1908_Rev03

面罩带佩戴指南 (可选)

如果Derma LED mask不能紧紧地贴在脸上, 请使用提供的面罩带戴上Derma LED mask。
将带子连接到Derma LED, 如下所示。

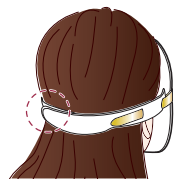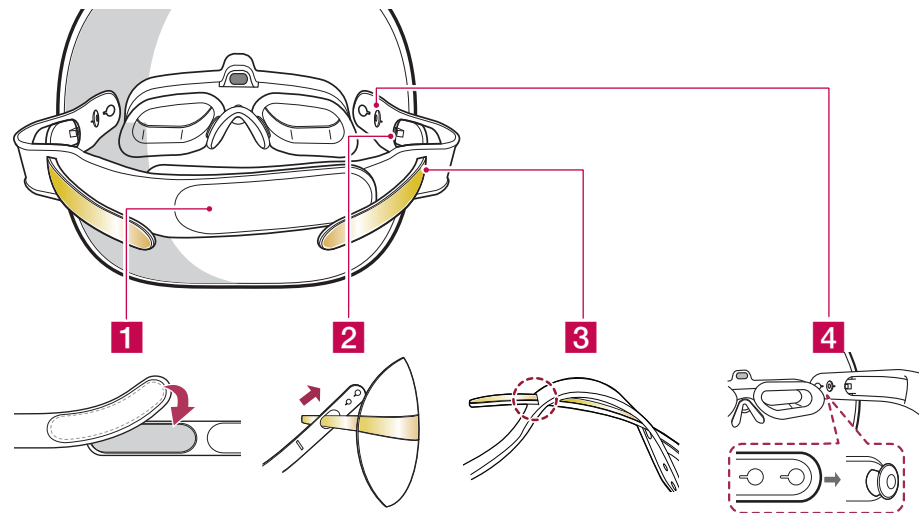

用同样的方法在另一只眼镜架的腿上装入面罩带。

- ❗ 如果面罩带的长度太短或太长, 请重新调整挂钩位置或尼龙搭扣。
- 如果使用绑带时感到太紧, 可以松开绑带。
在仰卧姿势下使用面罩时, 建议使用时不系绑带。


使用



建议每天使用1次




使用以前使用的化妆品或适合您肤质的化妆品

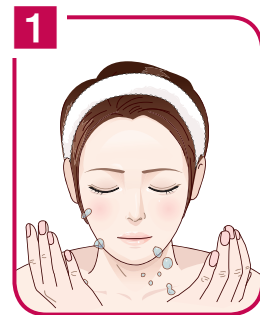


清洁面部。




请涂抹基础护肤品。

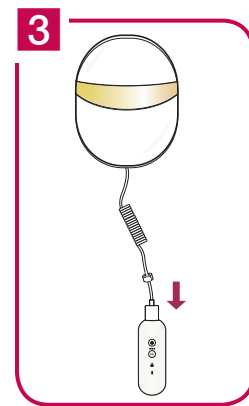

请将Derma LED面罩的
电缆连接于控制器的
端口。

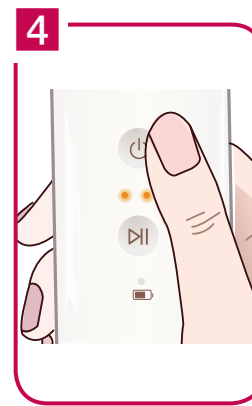


请按压 (电源) 按钮
打开电源。

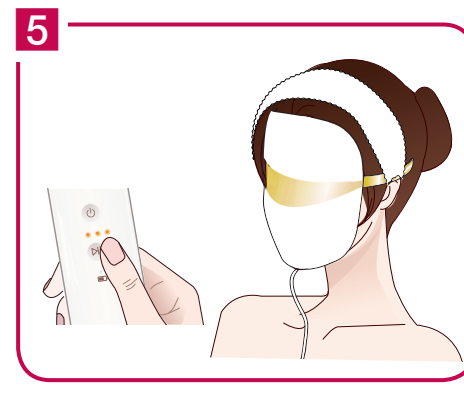


请如同戴眼镜般佩戴 Derma LED面罩。
请按 (开始/暂停) 按钮开始进行护理。

- ❗ 佩戴面罩后, 如果不起作用, 请将皮肤紧贴在佩戴部分中间的近距离传感器上。

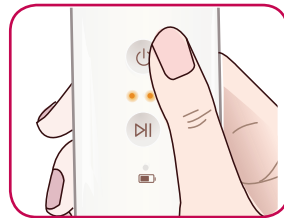


打开/关闭电源

请短按 (电源) 按钮。

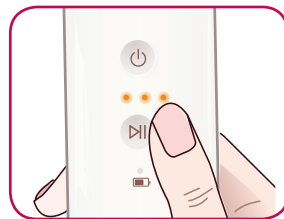


开始/暂停

请短按 (开始/暂停) 按钮。

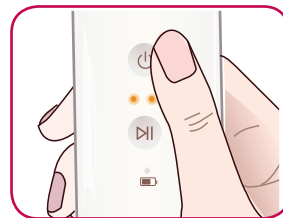

语音指导设置

在电源打开的情况下，每次更改时按住 (电源) 按钮约 5 秒。(语音提示 → 效果音提示 → 指导关闭(静音))

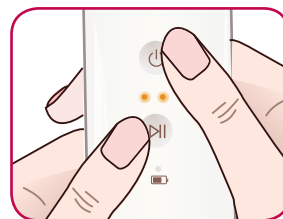


设置语言


在电源打开的情况下，每次更改时同时按住 (电源) 和 按钮约 3 秒。(韩语 → 英语 → 汉语)

充电

请使用充电底座充电

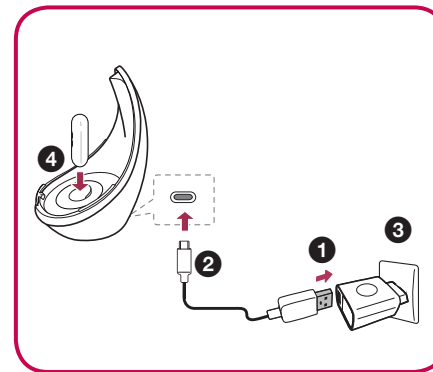

控制器充电

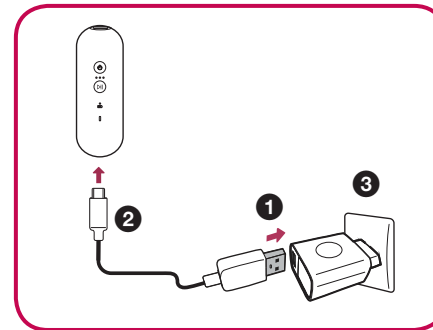

使用注意事项

- 使用装置时，根据个体皮肤状态差异，可能会对皮肤产生刺激，如果皮肤持续产生刺激性过敏症状，请减少使用次数。
- 如发生以下情况，建议在专业人士指导下使用设备。
 - 过敏性肤质、痤疮、皮炎，皮肤治疗、整容手术或脱发治疗手术后
 - 佩戴心脏起搏器、器械植入或金属假肢装置
- 仅可用于面部治疗，不建议用于身体。
- 当带有 LED 的设备正在运行时，请勿与 LED 灯有直接目光接触。过度暴露于光线下可能会导致眼睛受伤。
- 建议1天使用1次。使用2次以上时，皮肤有可能出现发热感。
- 在使用该装置之前，如果您正在接受皮肤科相关治疗或出现皮肤问题，请先咨询皮肤科医生。
- 不推荐怀孕、月经、哺乳期妇女使用。（不稳定的荷尔蒙平衡可能会引起暂时性的皮肤问题。）
- 请勿将本产品用于此说明书所列内容之外的用途。
- 请不要使用含有下列成分的护肤品，因为它可能会降低效果。（例如：酒精、防晒霜、视黄醇、油）