




LG Pra.L
Total Tight Up Care


모델명
BLJ1 BLJ2



충전하기

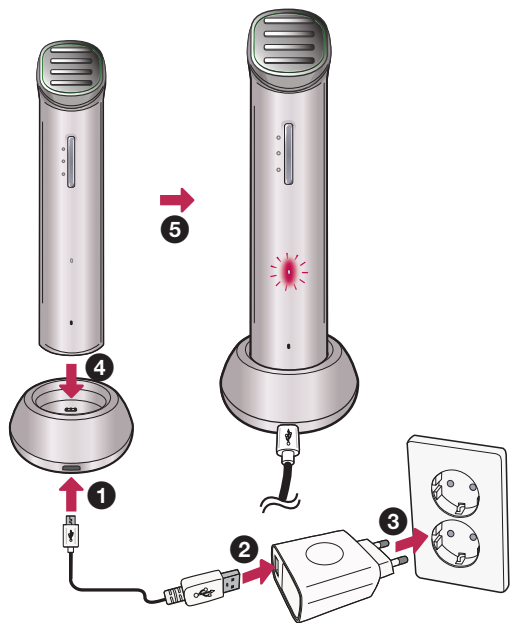


전원 켜기 / 끄기

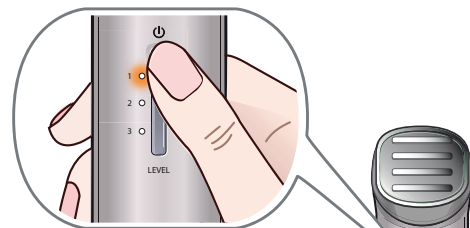


⏻ (전원) 버튼을 짧게 누르세요.

강도 선택

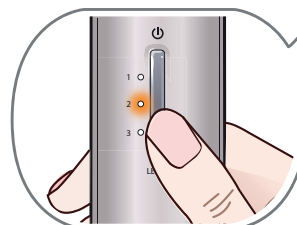


LEVEL 버튼을 짧게 누르세요.
(1 → 2 → 3)

음성 가이드 기능 설정

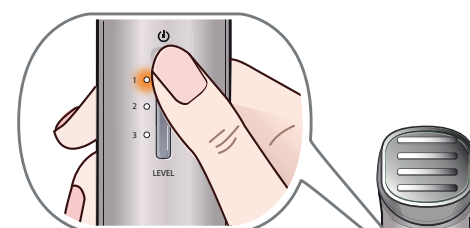


⏻ (전원) 버튼을 길게 (안내가 나올 때까지) 누르세요.
(음성 가이드 → 효과음 가이드 → 가이드 끄(무음))

언어 설정

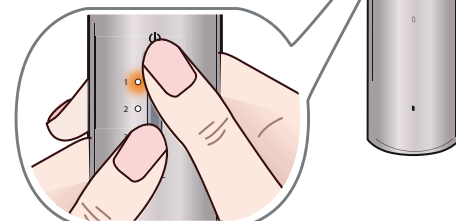

⏻ (전원) 버튼과 LEVEL 버튼을 동시에 길게 (안내가 나올 때까지) 누르세요.
(한국어 → 영어 → 중국어)

모드 선택

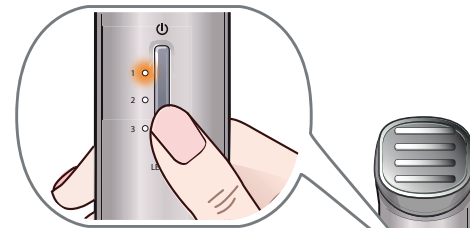

LEVEL 버튼을 길게 (안내가 나올 때까지) 누르세요.
(토탈 케어 모드 → 타이팅닝 전용 모드 → 타이트업 전용 모드)

- **토탈 케어 모드** : 타이팅닝 모드 + 타이트업 모드
- **타이팅닝 전용 모드** : 피부 진피 속 탄력 개선에 도움을 줌.
- **타이트업 전용 모드** : 피부 조직 및 근육을 자극하여 안면 타이트업에 도움을 줌

사용 시 주의사항

- 본 기기 사용시 개인별 피부 상태에 따라 다양한 형태의 피부 자극이 있을 수 있습니다. 이러한 자극이 있을 경우 사용 횟수를 줄여주세요.
- 아래의 경우에 대해서는 전문의 상담 후 사용을 권장합니다.
 - 알레르기 피부, 여드름, 피부염, 피부시술, 성형, 탈모시술
 - 심장 박동기 착용 및 장치 이식 또는 금속 보철장치 착용
- 얼굴 전용관리기로 바디 관리 사용은 권장하지 않습니다.
- 작동 중 LED 불빛을 직접적으로 응시하지 마세요. 지나치게 오래 불빛에 노출될 경우, 안구에 손상을 입을 수 있습니다.
- UV 헤드 보호캡의 LED 불빛을 직접적으로 쬐지 마세요. 지나치게 오래 불빛에 노출될 경우, 안구 및 피부에 손상을 입을 수 있습니다.
- 제품은 주 2회 사용을 권장합니다. 부위별 연속 2회 이상 사용 시 피부에 발열감이 생길 수 있습니다.
- 현재 피부과 관련 치료 중이거나 피부 상태에 이상이 있는 경우, 기기 사용 전에 피부과 전문의와 상담 후 사용하세요.
- 임신, 생리,수유중인 여성은 사용을 권장하지 않습니다. (호르몬 밸런스가 불안정하여 일시적으로 피부 트러블이 심해질 수 있습니다.)
- 목 부분에 본 기기를 사용할 때, 갑상선이 있는 목젓 부분은 피하여 사용하세요.
- 본 사용설명서에 나와 있는 내용 이외의 용도로 기기를 사용하지 마세요.
- 피부의 개인차에 따라 따끔거림 등 피부 자극이 느껴진다면 단계를 1단계부터 사용해 주세요.
- 아래 성분이 포함된 화장품 사용 시 효과를 감소시킬 수 있으므로 사용에 유의해주세요 (예시 : 변성알코올, 자외선 차단제, 레티놀, 오일 성분)

토탈 케어 모드

※ 고주파와 미세전류 등으로 단계별 케어를 통한 탄력 개선과 타이트업 효과에 도움을 줍니다.


※ 주요 기능 : 타이트닝 모드 (RF (고주파), RED LED) + 타이트업 모드 (미세 전류)




메이크업을 모두 지우고 세안하세요.




수분젤을 넉넉히 바르세요. (사용 부위 또는 기기 헤드)

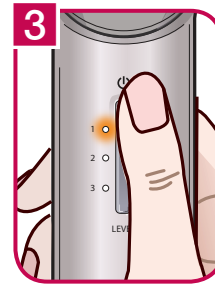

전원을 켜면 토탈 케어 모드가 1단계로 시작됩니다.

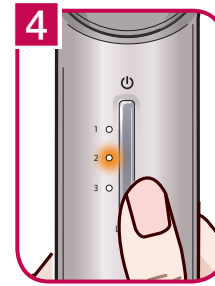

LEVEL 버튼을 짧게 눌러 강도를 선택하세요.

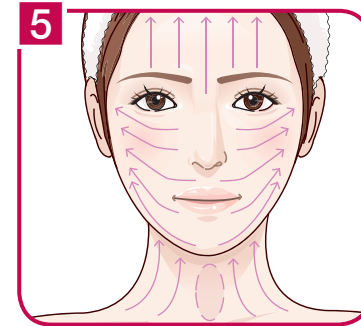

케어 방법 및 순서를 확인 후 원하는 부위를 마사지 하세요.

※ 케어 가능 부위 : 이마 / 볼 / 턱 / 목
 ⚠ 목 부분에 본 기기를 사용할 때, 갑상선이 있는 목젓 부분은 피하여 사용하세요. 갑상선 관련 증종의 질환을 앓았거나 치료 중이라면 전문의와 상담 후 사용할 것을 권장합니다.


※ 케어 방법

원하는 부위에 기기를 대세요. (이마 또는 볼 등) 화살표 방향에 따라, 효과음이 날 때까지 천천히 끌어올리면서 마사지 하세요.

- 5초 간격으로 효과음이 울립니다.

※ 케어 순서 (6분씩 3회, 총 18분간 동작합니다.)

- ① 첫 번째 부위(6분) : 타이트닝 모드 3분, 타이트업 모드 3분 간 마사지
- ② 두 번째 부위(6분) : 타이트닝 모드 3분, 타이트업 모드 3분 간 마사지
- ③ 세 번째 부위(6분) : 타이트닝 모드 3분, 타이트업 모드 3분 간 마사지

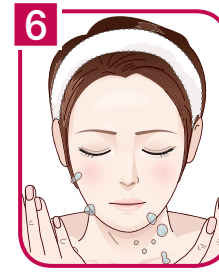

사용 후 미지근한 물로 얼굴을 충분히 헹궈주세요.