



LG Pra.L

简易说明书

多功能美容仪

使用产品前请阅读使用说明。
保留备用。

型号
BLP1



产品详细说明书请参考LG 电子（中国）
有限公司官方网站中的电子手册。



MFL71818016
2109_Rev02

www.lg.com

功能须知

本美容仪用于肌肤弹性护理采用高频 / 微电流复合技术，同时结合超声波导入 / 电离子渗透复合技术促进化妆品有效吸收。

※ 高频：通过在皮肤组织内部产生深层热量，从而提升肌肤弹性的技术。

※ 微电流：通过刺激皮肤组织及肌肉，帮助改善肌肤弹性的技术。

– 什么是微电流？一种小于1,000 μ A的微弱电流，类似于流经生物体的电流

※ 超声波导入：利用超声波将化妆品的有效成分传递至皮肤深层的技术。

※ 离子电渗透：赋予皮肤电位差，促进护肤品有效成分深层渗透的技术。

集中护理模式

使用一个产品，仅通过一个护理头即可同时实现皮肤弹性提升并促进护肤品吸收。


眼部护理模式

采用针对娇嫩眼周肌肤的低刺激复合弹性护理技术与轻柔贴合眼周修护的专用护理头，缔造童颜美眸。

冰爽护理模式

采用冰爽护理，缩小皮肤毛孔。

确认产品组成

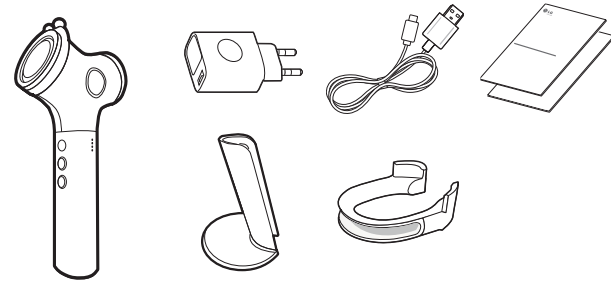


查看产品



- 1 眼部护理头
- 2 集中护理头
- 3 集中 / 眼部护理电源 键
- 4 集中 / 眼部护理MODE 按钮、MODE指示灯
- 5 集中 / 眼部护理LEVEL 按钮、LEVEL指示灯
- 6 冰爽护理头
- 7 冰爽护理 电源 键
- 8 冰爽护理 LEVEL 按钮、LEVEL指示灯
- 9 皮肤接触电极
- 10 透气孔
- 11 电池状态指示灯

充电

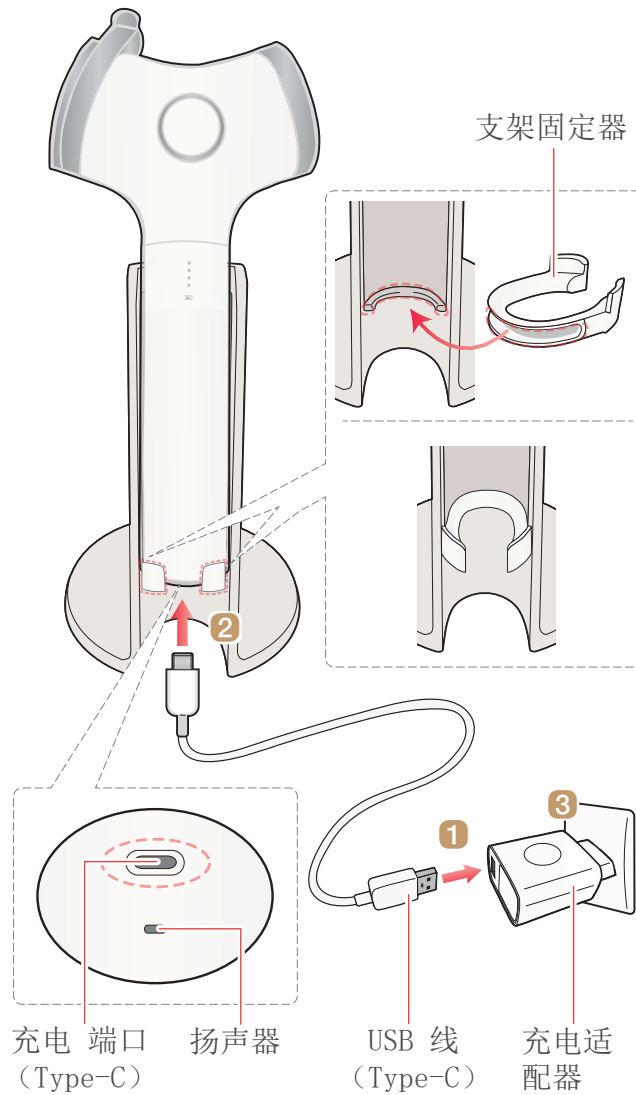

⚠ 本设备在充电过程中不能使用。

确认产品规格

一般事项	
电源 (电源适配器)	型号: ADS-12BA-06Y 05010EPK C 制造商: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 输入: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 输出: 5 V 2.0 A
尺寸 (长 x 高 x 宽)	主机: 约 42.3 mm x 215 mm x 33.6 mm 支架: 约 115.8 mm x 148.5 mm x 113 mm
使用温度	5 ° C 至 35 ° C
使用湿度	0 % 至 90 %
建议使用次数	1 周 3 次 (以集中护理模式为准) • 充满电后，以集中护理 3 档为准，可使用约 60 分钟。(以本公司内部测试结果为基准) • 使用时间可能因电池保修期、环境温度或使用条件而异。
充电完成时间	3 小时以内 • 5 V、2.0 A 充电适配器标准 • 充电时间有可能因充电适配器规格、电池剩余量、环境温度或充电条件而异。

• 设计和规格若有变更，恕不另行通知。

使用注意事项

护理皮肤前注意事项

- 本产品为面部专用产品，因此不建议用于身体其他部位。
- 使用本产品时，根据个人皮肤状态，可能出现皮肤泛红或刺痛等皮肤刺激。
若此类刺激持续存在，请立即停止使用，咨询皮肤科医生后再使用。
- 面部有皮肤疾病或皮肤容易发炎的人群请咨询医生后使用。
- 紫外线过敏等光过敏性疾病患者，勿使用。
- 若使用本产品时未使用足量护肤品，可能会有刺痛感等皮肤刺激情况发生。
- 若使用频率高于建议使用周期，可能给皮肤造成刺激。
(集中护理 / 眼部护理: 1 周 3 次，冰爽护理: 1 天 1 次)
- 使用含有以下成分的护肤品时请注意，可能会降低使用效果。(如: 变性乙醇、防晒产品、视黄醇、油成分)
- 请勿将仪器护理头停留在一个部位使用，按照本使用说明书的说明一边移动一边使用。
- 眼部护理头建议用于眼部周围 / 嘴角。
- 冰爽护理仅可用于皮肤美容。

安全注意事项

- 产品掉入水中时, 请不要触碰充电线, 并立即分离充电适配器。
- 请务必使用本产品附带的充电适配器，——如使用其他适配器，可能会导致产品故障，并无法申请保修。
- 在给本产品充电时，请注意充电部位不要沾上水分及化妆品等异物，可能会导致产品损坏或发生火灾的危险。




- 警告: 请勿在有水分的环境下使用，如泡澡，淋浴，洗漱等。

- 运行中请勿直视 LED 灯。
- 请勿连续使用冰爽护理。若连续使用冰爽护理，为了维持冰爽护理头内部的适中温度，在语音提示后，产品电源可能会自动关闭。此种情况下，请等待 60 分钟后再次使用。

① 安全及注意事项请参考另外的说明书。


设置语音

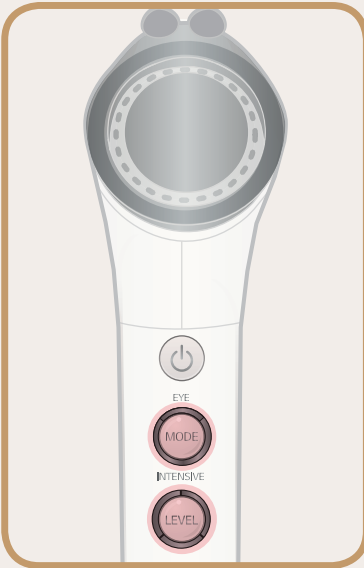

在集中 / 眼部护理电源打开的状态下，每次同时长按集中 / 眼部护理MODE 按钮和集中 / 眼部护理LEVEL 按钮约 3 秒，将更改语音设置。

- 语音 → 效果音 → 提示音关闭（静音）

设置语言

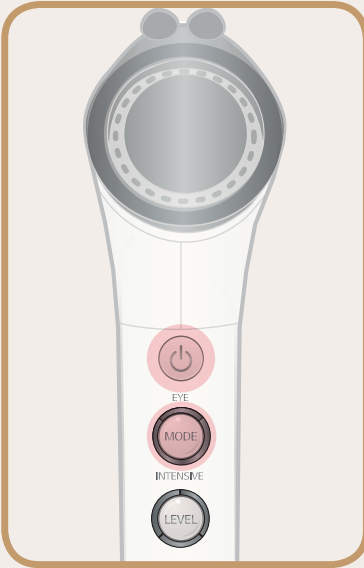


在集中 / 眼部护理电源打开的状态下，每次同时长按集中 / 眼部护理电源 键和集中 / 眼部护理MODE 按钮约 3 秒，将更改使用语言。

护理模式须知

护理名称	使用护理头	运行状态 LED
集中护理		EYE INTENSIVE
眼部护理		EYE INTENSIVE
冰爽护理		

集中护理下加热模式开启 / 关闭

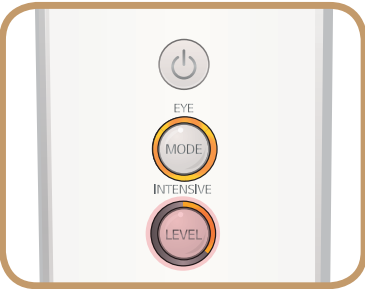


请在集中 / 眼部护理电源打开的状态下，每次长按集中 / 眼部护理LEVEL 按钮约 3 秒，选择加热模式（开启 / 关闭）。

- 眼部护理及冰爽护理不支持加热模式。

- ※ 若将产品的集中 / 眼部护理电源关闭后再打开，加热模式将自动设置为“开启”。
- ※ 但是，若加热模式导致产品过热时，请停止使用加热模式。
- ※ 加热模式不可更改温度。

集中护理（加热模式请参考集中护理中开启 / 关闭加热）

建议 1 周 3 次 建议使用原本使用的护肤品或适合皮肤类型的护肤品（电流专用凝胶或维生素精华等）

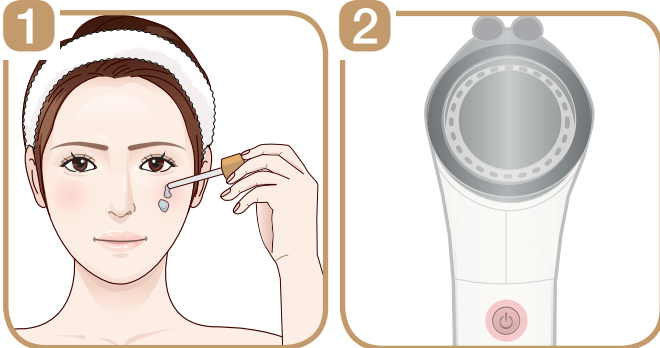

彻底洁面后，请在想要护理的每个部位涂抹足量护肤品。

请按集中 / 眼部护理电源 键，打开仪器。




请按集中 / 眼部护理LEVEL 按钮，选择适合本人的集中护理强度（1~3 档）。

如图所示，在额头 / 脸颊 / 下颚部位慢慢提拉集中护理头，按摩 6 分钟。

※ 眼部周围请使用眼部护理模式。

眼部护理

建议 1 周 3 次 建议使用原本使用的护肤品或适合皮肤类型的护肤品（电流专用凝胶或维生素精华等）

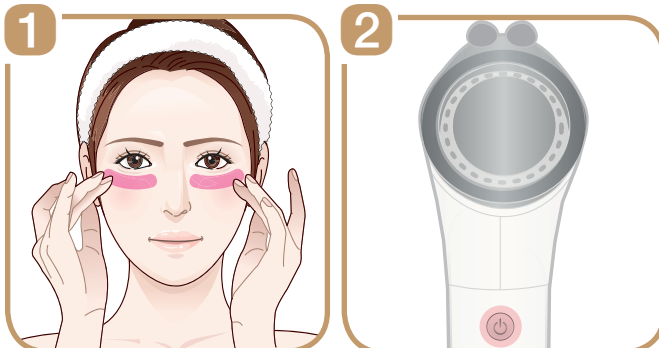

彻底洁面后，请在想要护理的部位涂抹足量护肤品。

请按集中 / 眼部护理电源 键，打开仪器。




请使用集中 / 眼部护理MODE 按钮选择眼部护理模式后，使用集中 / 眼部护理LEVEL 按钮选择强度（1~3 档）。

如图所示，按照箭头方向在眼周 / 嘴角慢慢如画圆般移动眼部护理头，按摩 3 分钟。

冰爽护理

建议 1 天 1 次，在集中护理 / 眼部护理后进行冰爽护理，帮助舒缓皮肤。

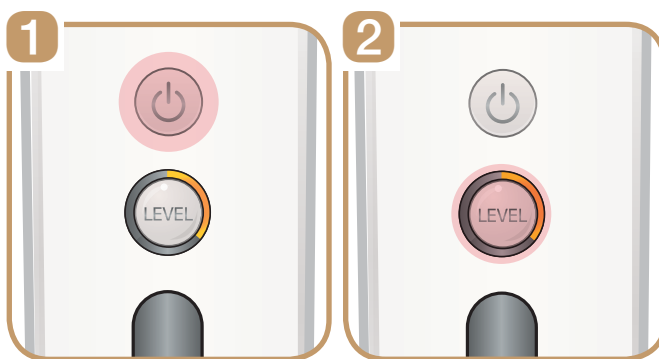

请按冰爽护理电源 键，打开仪器。

请按冰爽护理LEVEL 按钮，选择适合自己的冰爽护理温度（1~3 档*）。*档位越高，温度越低



※ 请勿连续使用冰爽护理。若连续使用冰爽护理，为了维持冰爽护理头内部的适中温度，在语音提示后，产品电源可能会自动关闭。此种情况下，请等待 60 分钟后再使用。

Q&A

Q 应如何管理产品？

护理后，若产品或产品护理头有护肤品等异物残留，请用湿纸巾或用水浸湿的布擦拭相应位置，然后置于干燥阴凉处晾干。

请勿使用乙醇、苯、丙酮等强化学制品。



请注意不要让水或护肤品等进入产品透气孔。

A