



LG Pra.L (肤丽爱)
离子美肤导入仪


型号名称
BBJ1 BBJ2




MBM66166252

1808_Rev03

充电

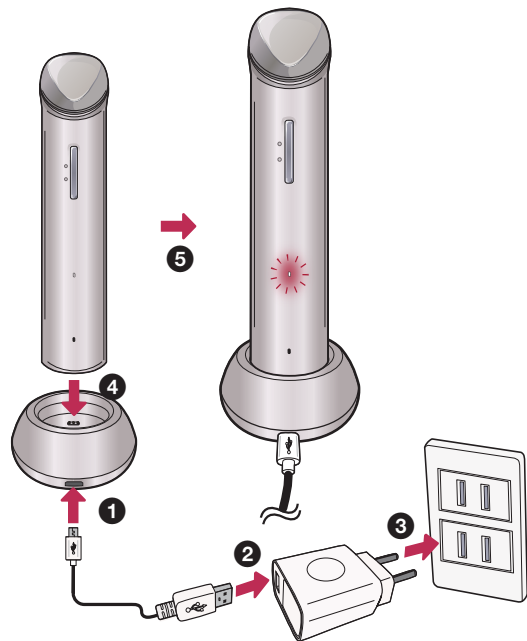

打开/关闭电源

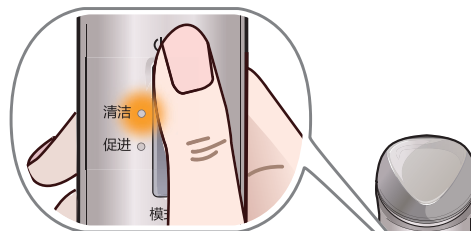


请短按 (电源) 按钮。
充电时不会工作。

选择模式 (清洁 / 促进)




请短按 模式 按钮。
(清洁 → 促进)

语音提示功能设定

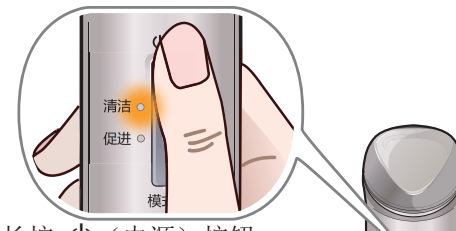

请长按 (电源) 按钮。
(直至听见语音导航)
(语音提示 → 效果音提示
→ 指导关闭(静音))

语言设置

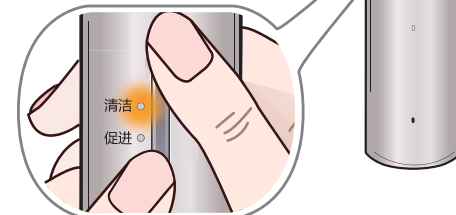

请同时长按 (电源)
键和 模式 按钮。(直至听见语音导航)
(中文 → 英语)


安全注意事项

- 当出现冒烟或异味时，请立即停止使用，拔掉充电器并联络客服中心。
- 请务必使用原装充电器进行充电。
- 受损电池可能有爆炸的危险。
- 请勿拆卸、维修或改装本产品。
- 请使用干燥的手拿取充电器。
- 不要直接暴露紫外线防护帽的LED灯。过度暴露在光线下会引起眼睛和皮肤的损伤。
- 建议每种模式1天使用1次。使用2次以上时，皮肤有可能出现发热感。
- 在使用该装置之前，如果您正在接受皮肤科相关治疗或出现皮肤问题，请先咨询皮肤科医生。
- 孕期、月经期、哺乳期妇女不宜使用。（不稳定的荷尔蒙平衡可能导致短暂的皮肤问题。）
- 请勿将本产品用于此说明书所列内容之外的用途。



导出清洁模式 (清洁)

主要功能：加热，
离子 (+)

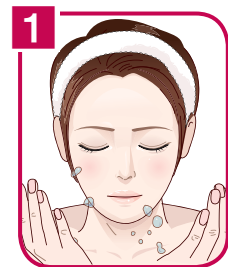

请彻底卸妆后洁面。




请使用补水凝胶。



请打开电源。



请按下 模式 按钮，
选择 清洁 模式。

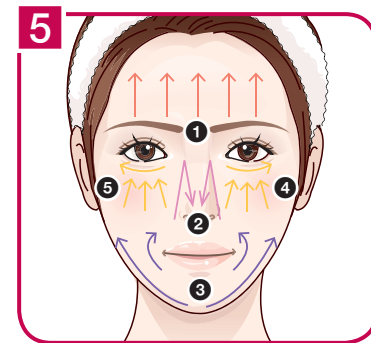

请根据语音提示功能，按照编号顺序向箭头方向清洁各部位。


- ➔ ➊ 额头 (45秒)
- ➔ ➋ 鼻子 (45秒)
- ➔ ➌ 下巴 (30秒)
- ➔ ➍ 左脸颊 (30秒)
- ➔ ➎ 右脸颊 (30秒)



清洁后，请使用温水充分地清洁面部。

导入吸收模式 (促进)

主要功能：加热，
离子 (-)，超声波

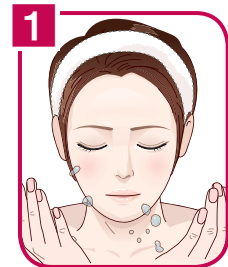

请彻底卸妆后洁面。




请涂抹护肤品
(维生素C精华等)。



请打开电源。



请按下 模式 按钮，
选择 促进 模式。

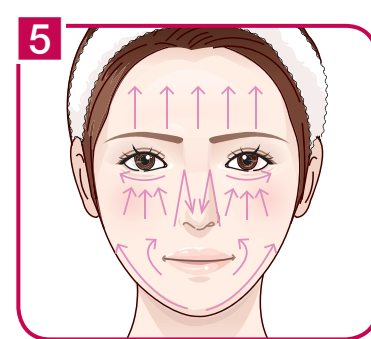

请按箭头方向在需要护理的部位护理3分钟。